



ファイル名:A9C02K16.CHR P x S O 1 7 1 0 4 0 0 - 6
 試料注入,日付:03-02-1999 時間:10:16:10
 印刷,日付:03-02-1999 時間:15:36:20

| No | R. T. (min) | 面積 (uv*sec) | 面積% | 高さ (uv) | 高さ% |
|----|----------------|----------------|--------|------------|--------|
| 1 | 2.764 | 38759 | 0.156 | 2800 | 0.233 |
| 2 | 5.383 | 44045 | 0.177 | 1581 | 0.132 |
| 3 | 7.738 | 25444 | 0.102 | 1040 | 0.087 |
| 4 | 9.325 | 34120 | 0.137 | 1294 | 0.108 |
| 5 | 10.605 | 1630585 | 6.547 | 50810 | 4.228 |
| 6 | 12.909 | 11869 | 0.048 | 407 | 0.034 |
| 7 | 15.155 | 41290 | 0.166 | 1129 | 0.094 |
| 8 | 17.078 | 27730 | 0.111 | 701 | 0.058 |
| 9 | 18.249 | 108612 | 0.436 | 2742 | 0.228 |
| 10 | 21.613 | 4833217 | 19.407 | 84718 | 7.049 |
| 11 | 23.530 | 13052 | 0.052 | 647 | 0.054 |
| 12 | 27.691 | 18336 | 0.074 | 513 | 0.043 |
| 13 | 29.045 | 76195 | 0.306 | 3459 | 0.288 |
| 14 | 29.469 | 45056 | 0.181 | 2469 | 0.205 |
| 15 | 30.134 | 492712 | 1.978 | 20926 | 1.741 |
| 16 | 30.507 | 4067274 | 16.332 | 287753 | 23.944 |
| 17 | 30.712 | 3092490 | 12.418 | 232975 | 19.386 |
| 18 | 31.451 | 94355 | 0.379 | 5875 | 0.489 |
| 19 | 32.204 | 6232911 | 25.028 | 279067 | 23.221 |
| 20 | 33.316 | 2703486 | 10.856 | 168662 | 14.034 |
| 21 | 34.004 | 445501 | 1.789 | 16785 | 1.397 |
| 22 | 34.889 | 142788 | 0.573 | 7154 | 0.595 |
| 23 | 35.371 | 148962 | 0.598 | 8570 | 0.713 |
| 24 | 35.810 | 150214 | 0.603 | 8740 | 0.727 |
| 25 | 36.220 | 114717 | 0.461 | 6193 | 0.515 |
| 26 | 36.622 | 52203 | 0.210 | 2866 | 0.238 |
| 27 | 37.010 | 11878 | 0.048 | 798 | 0.066 |
| 28 | 51.880 | 206428 | 0.829 | 1113 | 0.093 |
| 合計 | | 24904228 | | 1201784 | |

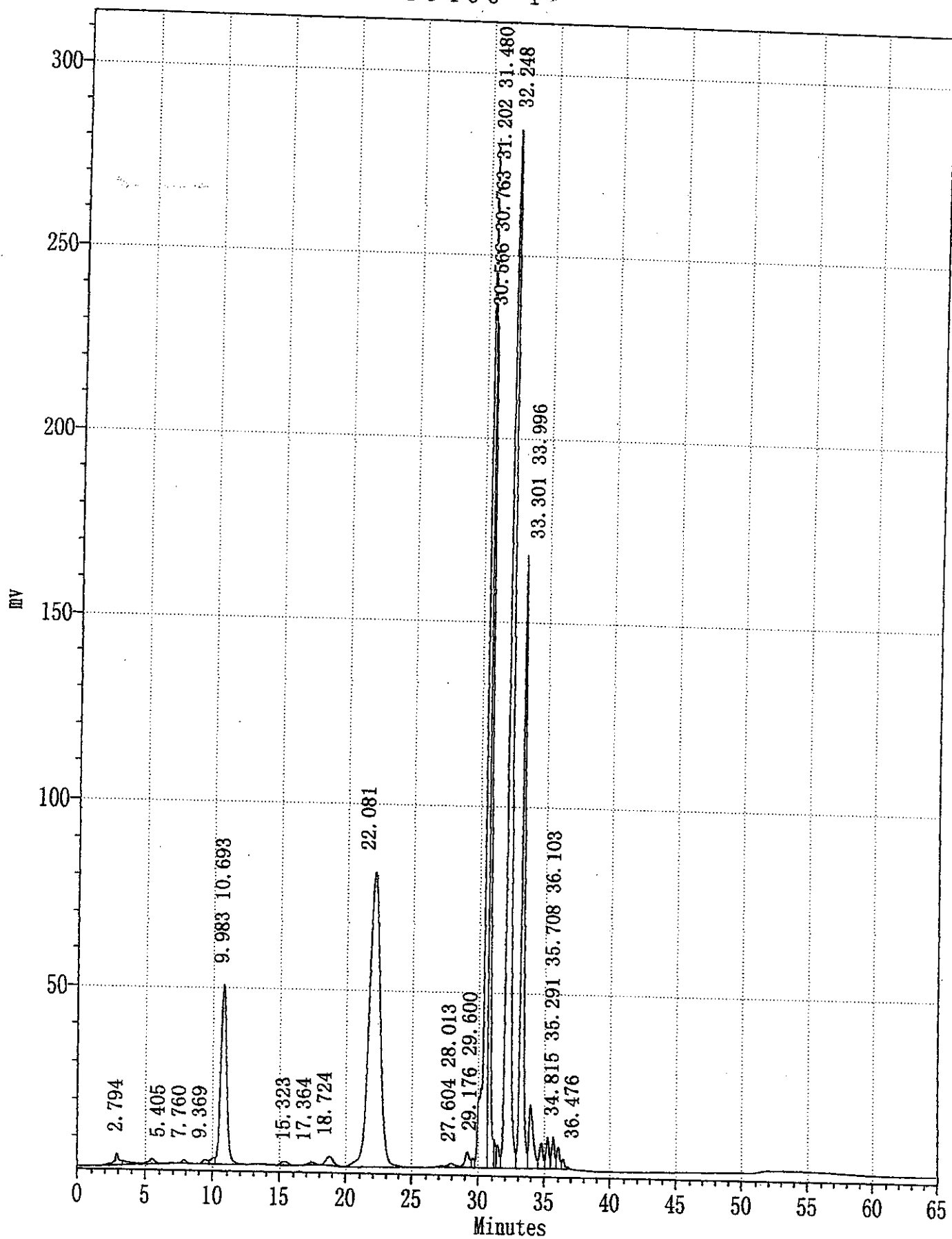


ファイル名:A9C01R17.CHR P x S O 1 8 1 0 4 0 0 - 1
 試料注入,日付:03-01-1999 時間:17:17:48
 印刷,日付:03-02-1999 時間:15:38:59

| No | R. T. (min) | 面積 (uv*sec) | 面積% | 高さ (uv) | 高さ% |
|----|----------------|----------------|--------|------------|--------|
| 1 | 2.794 | 74076 | 0.313 | 3246 | 0.277 |
| 2 | 5.405 | 96854 | 0.409 | 1553 | 0.133 |
| 3 | 7.760 | 24554 | 0.104 | 1021 | 0.087 |
| 4 | 9.369 | 33299 | 0.141 | 1244 | 0.106 |
| 5 | 9.983 | 36594 | 0.155 | 1714 | 0.146 |
| 6 | 10.693 | 1515808 | 6.405 | 47973 | 4.099 |
| 7 | 15.323 | 44490 | 0.188 | 1132 | 0.097 |
| 8 | 17.364 | 32420 | 0.137 | 791 | 0.068 |
| 9 | 18.724 | 102421 | 0.433 | 2510 | 0.214 |
| 10 | 22.081 | 4587352 | 19.383 | 79425 | 6.786 |
| 11 | 27.604 | 15054 | 0.064 | 377 | 0.032 |
| 12 | 28.013 | 44280 | 0.187 | 1140 | 0.097 |
| 13 | 29.176 | 100017 | 0.423 | 4253 | 0.363 |
| 14 | 29.600 | 40097 | 0.169 | 2552 | 0.218 |
| 15 | 30.566 | 4337010 | 18.325 | 279558 | 23.886 |
| 16 | 30.763 | 2907258 | 12.284 | 229876 | 19.641 |
| 17 | 31.202 | 90367 | 0.382 | 7695 | 0.657 |
| 18 | 31.480 | 97796 | 0.413 | 6076 | 0.519 |
| 19 | 32.248 | 5937878 | 25.089 | 282807 | 24.164 |
| 20 | 33.301 | 2569432 | 10.856 | 165682 | 14.156 |
| 21 | 33.996 | 421792 | 1.782 | 17241 | 1.473 |
| 22 | 34.815 | 134350 | 0.568 | 6948 | 0.594 |
| 23 | 35.291 | 140854 | 0.595 | 8472 | 0.724 |
| 24 | 35.708 | 140680 | 0.594 | 8614 | 0.736 |
| 25 | 36.103 | 100388 | 0.424 | 5926 | 0.506 |
| 26 | 36.476 | 42208 | 0.178 | 2557 | 0.218 |
| 合計 | | 23667330 | | 1170383 | |

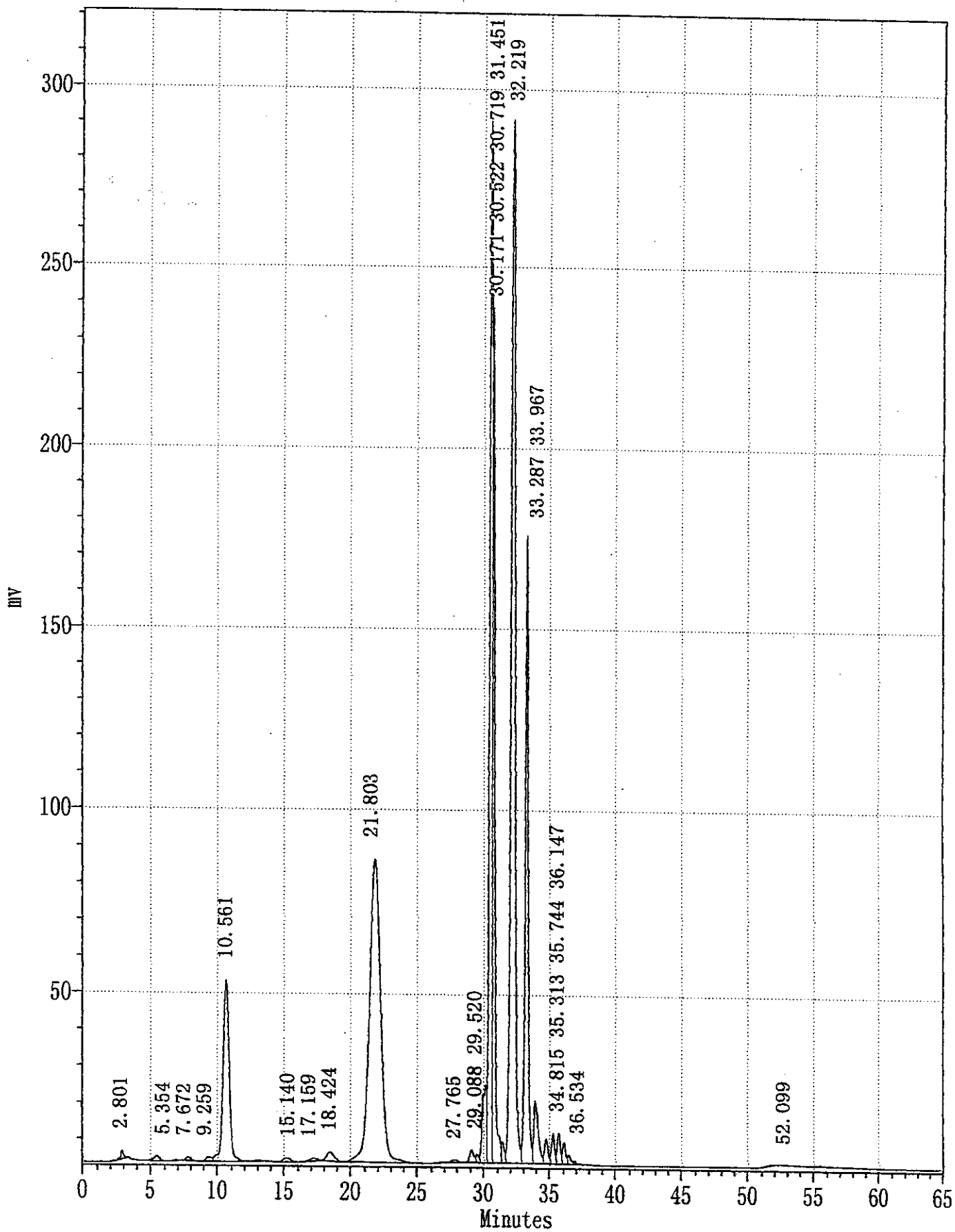


ファイル名:A9C01U38.CHR Px SO1810400-2
 試料注入,日付:03-01-1999 時間:20:38:56
 印刷,日付:03-02-1999 時間:15:38:26


| No | R. T. (min) | 面積 (uv*sec) | 面積% | 高さ (uv) | 高さ% |
|----|----------------|----------------|--------|------------|--------|
| 1 | 2.801 | 39104 | 0.159 | 2465 | 0.203 |
| 2 | 5.354 | 45958 | 0.187 | 1522 | 0.126 |
| 3 | 7.672 | 26672 | 0.108 | 1070 | 0.088 |
| 4 | 9.259 | 35892 | 0.146 | 1293 | 0.107 |
| 5 | 10.561 | 1628332 | 6.621 | 49748 | 4.102 |
| 6 | 15.140 | 45478 | 0.185 | 1191 | 0.098 |
| 7 | 17.159 | 31944 | 0.130 | 782 | 0.064 |
| 8 | 18.424 | 106958 | 0.435 | 2636 | 0.217 |
| 9 | 21.803 | 4858429 | 19.754 | 83055 | 6.848 |
| 10 | 27.765 | 25457 | 0.104 | 781 | 0.064 |
| 11 | 29.088 | 83441 | 0.339 | 3694 | 0.305 |
| 12 | 29.520 | 38615 | 0.157 | 2334 | 0.192 |
| 13 | 30.171 | 479316 | 1.949 | 21519 | 1.774 |
| 14 | 30.522 | 4093616 | 16.644 | 287936 | 23.741 |
| 15 | 30.719 | 3066194 | 12.467 | 235707 | 19.434 |
| 16 | 31.451 | 95092 | 0.387 | 5971 | 0.492 |
| 17 | 32.219 | 6199481 | 25.206 | 288526 | 23.789 |
| 18 | 33.287 | 2680594 | 10.899 | 172287 | 14.205 |
| 19 | 33.967 | 433300 | 1.762 | 17440 | 1.438 |
| 20 | 34.815 | 135473 | 0.551 | 6919 | 0.570 |
| 21 | 35.313 | 144416 | 0.587 | 8502 | 0.701 |
| 22 | 35.744 | 142818 | 0.581 | 8688 | 0.716 |
| 23 | 36.147 | 102876 | 0.418 | 5983 | 0.493 |
| 24 | 36.534 | 45421 | 0.185 | 2635 | 0.217 |
| 25 | 52.099 | 10254 | 0.042 | 152 | 0.013 |
| 合計 | | 24595128 | | 1212836 | |

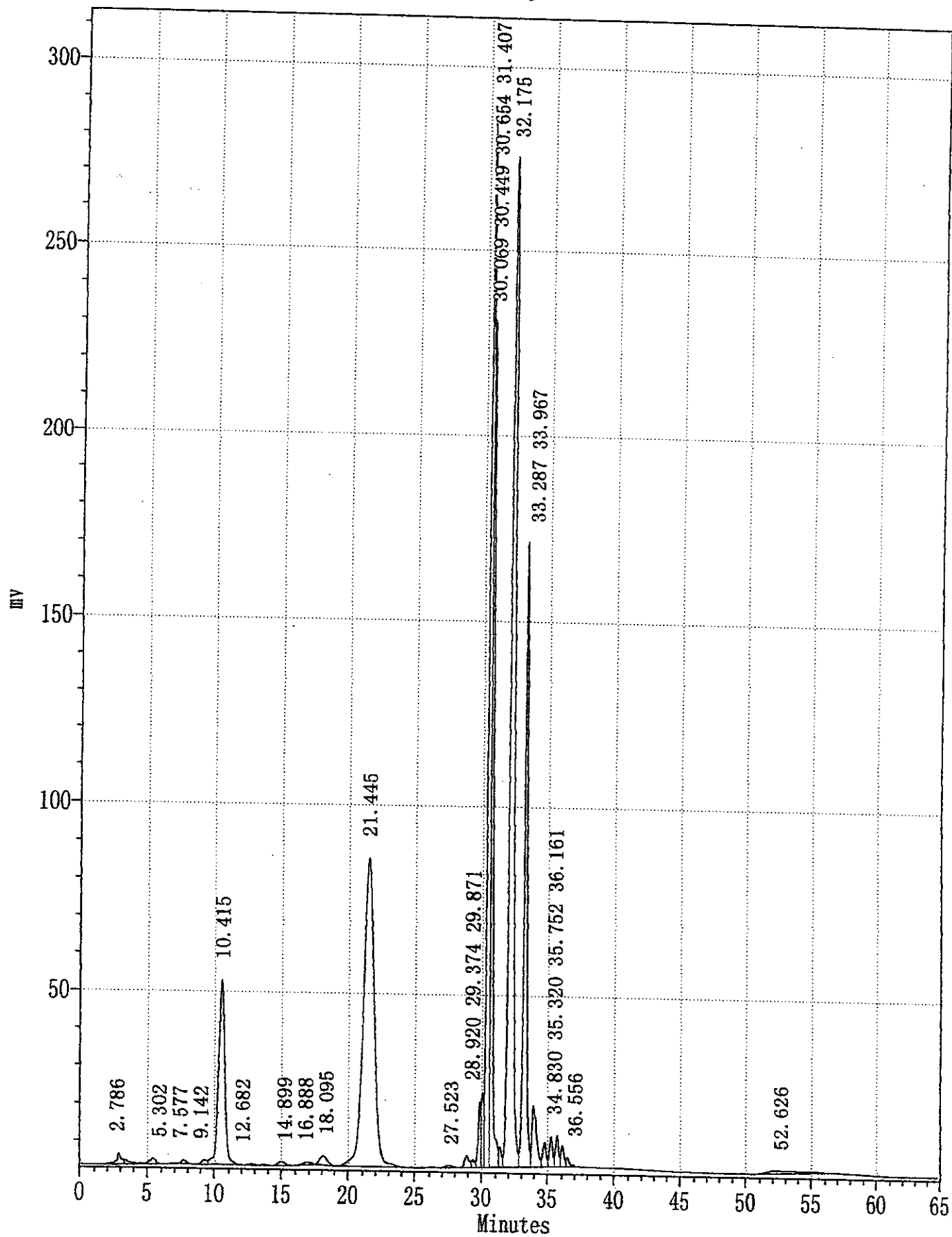


| No | R. T. (min) | 面積 (uv*sec) | 面積% | 高さ (uv) | 高さ% |
|----|----------------|----------------|--------|------------|--------|
| 1 | 2.786 | 71042 | 0.291 | 3102 | 0.261 |
| 2 | 5.302 | 95490 | 0.391 | 1600 | 0.134 |
| 3 | 7.577 | 25807 | 0.106 | 1046 | 0.088 |
| 4 | 9.142 | 33581 | 0.138 | 1261 | 0.106 |
| 5 | 10.415 | 1592540 | 6.528 | 49223 | 4.135 |
| 6 | 12.682 | 10912 | 0.045 | 382 | 0.032 |
| 7 | 14.899 | 45604 | 0.187 | 1179 | 0.099 |
| 8 | 16.888 | 29761 | 0.122 | 754 | 0.063 |
| 9 | 18.095 | 105533 | 0.433 | 2581 | 0.217 |
| 10 | 21.445 | 4780680 | 19.598 | 82290 | 6.912 |
| 11 | 27.523 | 27629 | 0.113 | 689 | 0.058 |
| 12 | 28.920 | 77116 | 0.316 | 3268 | 0.275 |
| 13 | 29.374 | 39136 | 0.160 | 2153 | 0.181 |
| 14 | 29.871 | 225626 | 0.925 | 17540 | 1.473 |
| 15 | 30.069 | 260355 | 1.067 | 20026 | 1.682 |
| 16 | 30.449 | 4014617 | 16.457 | 281211 | 23.621 |
| 17 | 30.654 | 3025086 | 12.401 | 228635 | 19.205 |
| 18 | 31.407 | 89918 | 0.369 | 5574 | 0.468 |
| 19 | 32.175 | 6096138 | 24.990 | 271841 | 22.834 |
| 20 | 33.287 | 2629994 | 10.781 | 167262 | 14.050 |
| 21 | 33.967 | 421762 | 1.729 | 16583 | 1.393 |
| 22 | 34.830 | 127611 | 0.523 | 6661 | 0.560 |
| 23 | 35.320 | 140166 | 0.575 | 8190 | 0.688 |
| 24 | 35.752 | 139974 | 0.574 | 8388 | 0.705 |
| 25 | 36.161 | 99530 | 0.408 | 5761 | 0.484 |
| 26 | 36.556 | 43636 | 0.179 | 2504 | 0.210 |
| 27 | 52.626 | 144794 | 0.594 | 784 | 0.066 |
| 合計 | | 24394038 | | 1190490 | |

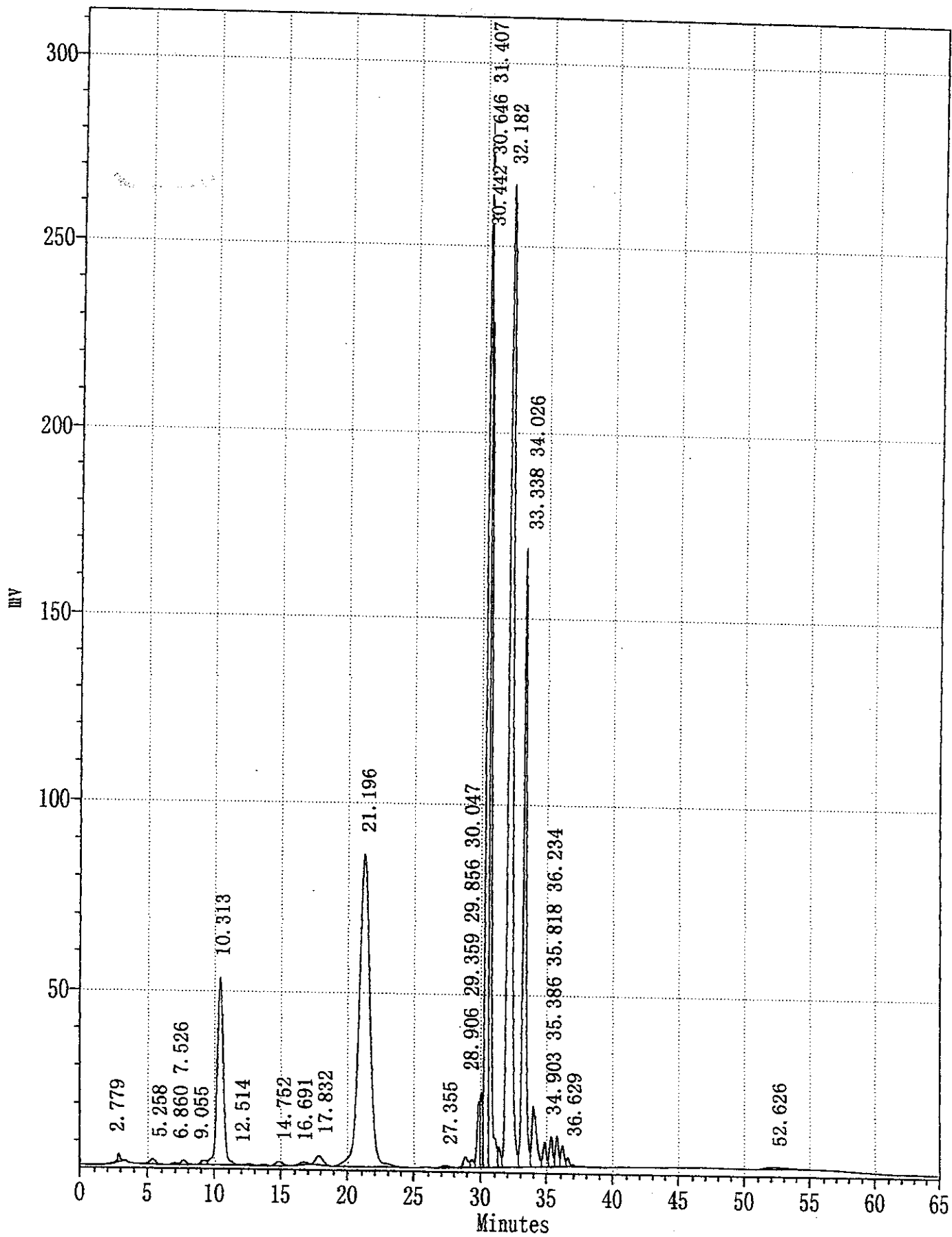

| No | R. T. (min) | 面積 (uv*sec) | 面積% | 高さ (uv) | 高さ% |
|----|----------------|----------------|--------|------------|--------|
| 1 | 2.779 | 36036 | 0.148 | 2323 | 0.198 |
| 2 | 5.258 | 46028 | 0.189 | 1558 | 0.132 |
| 3 | 6.860 | 10456 | 0.043 | 447 | 0.038 |
| 4 | 7.526 | 34748 | 0.143 | 1224 | 0.104 |
| 5 | 9.055 | 34410 | 0.141 | 1284 | 0.109 |
| 6 | 10.313 | 1603913 | 6.590 | 49647 | 4.223 |
| 7 | 12.514 | 11520 | 0.047 | 384 | 0.033 |
| 8 | 14.752 | 43330 | 0.178 | 1163 | 0.099 |
| 9 | 16.691 | 26338 | 0.108 | 666 | 0.057 |
| 10 | 17.832 | 101831 | 0.418 | 2560 | 0.218 |
| 11 | 21.196 | 4806652 | 19.748 | 82957 | 7.056 |
| 12 | 27.355 | 24332 | 0.100 | 524 | 0.045 |
| 13 | 28.906 | 72244 | 0.297 | 2994 | 0.255 |
| 14 | 29.359 | 40251 | 0.165 | 2192 | 0.186 |
| 15 | 29.856 | 221378 | 0.910 | 17527 | 1.491 |
| 16 | 30.047 | 265458 | 1.091 | 19916 | 1.694 |
| 17 | 30.442 | 3989488 | 16.391 | 280224 | 23.835 |
| 18 | 30.646 | 3081960 | 12.662 | 226528 | 19.268 |
| 19 | 31.407 | 88376 | 0.363 | 5431 | 0.462 |
| 20 | 32.182 | 6151849 | 25.275 | 263623 | 22.423 |
| 21 | 33.338 | 2634236 | 10.823 | 164751 | 14.013 |
| 22 | 34.026 | 419442 | 1.723 | 16208 | 1.379 |
| 23 | 34.903 | 126027 | 0.518 | 6612 | 0.562 |
| 24 | 35.386 | 134004 | 0.551 | 8128 | 0.691 |
| 25 | 35.818 | 138599 | 0.569 | 8225 | 0.700 |
| 26 | 36.234 | 100273 | 0.412 | 5648 | 0.480 |
| 27 | 36.629 | 43290 | 0.178 | 2441 | 0.208 |
| 28 | 52.626 | 53418 | 0.219 | 478 | 0.041 |
| 合計 | | 24339890 | | 1175662 | |

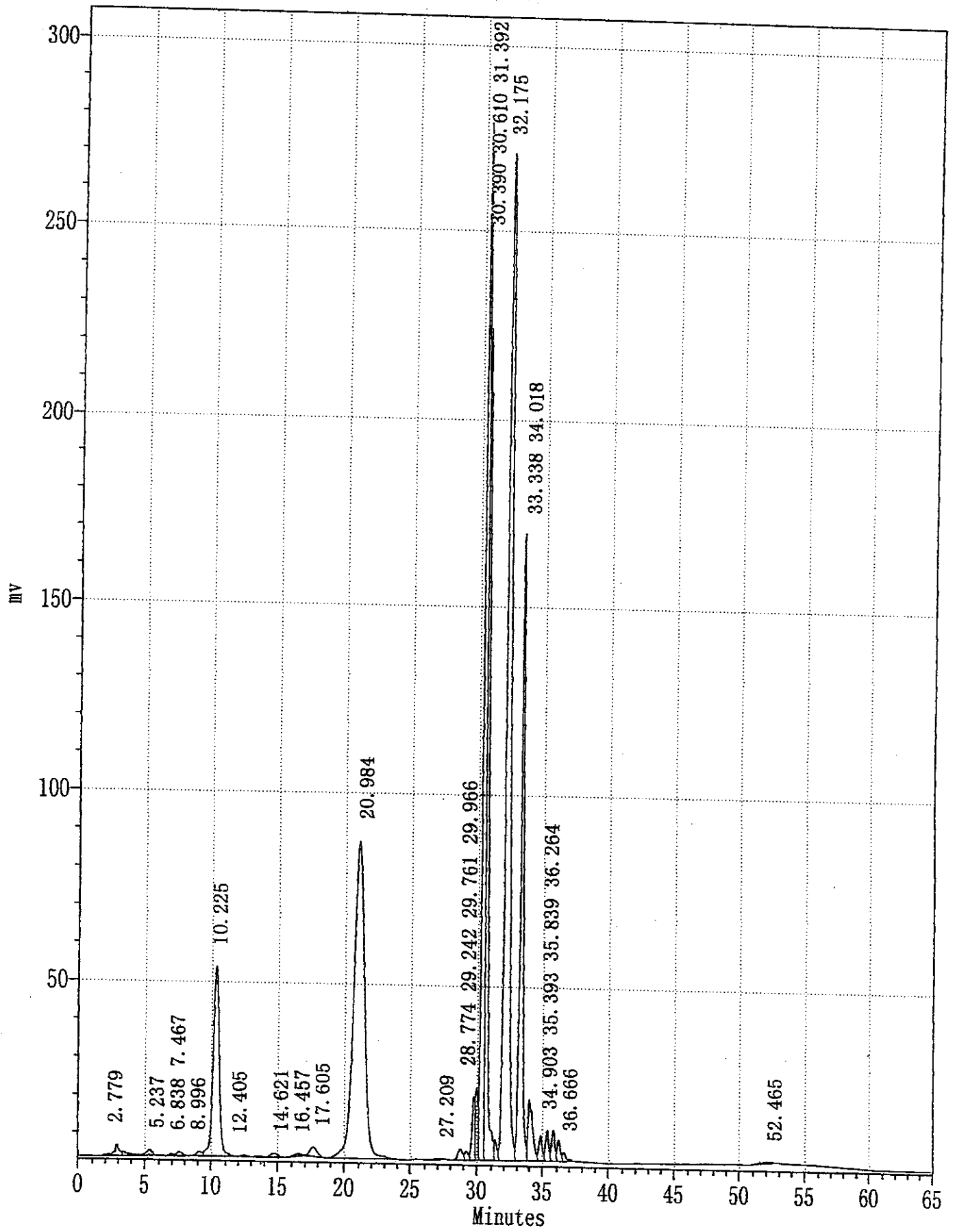


| No | R. T. (min) | 面積 (uv*sec) | 面積% | 高さ (uv) | 高さ% |
|----|----------------|----------------|--------|------------|--------|
| 1 | 2.779 | 72039 | 0.292 | 3121 | 0.267 |
| 2 | 5.237 | 91757 | 0.371 | 1613 | 0.138 |
| 3 | 6.838 | 11125 | 0.045 | 481 | 0.041 |
| 4 | 7.467 | 33796 | 0.137 | 1203 | 0.103 |
| 5 | 8.996 | 34551 | 0.140 | 1285 | 0.110 |
| 6 | 10.225 | 1613390 | 6.531 | 49892 | 4.264 |
| 7 | 12.405 | 11936 | 0.048 | 425 | 0.036 |
| 8 | 14.621 | 41452 | 0.168 | 1150 | 0.098 |
| 9 | 16.457 | 25162 | 0.102 | 665 | 0.057 |
| 10 | 17.605 | 102182 | 0.414 | 2582 | 0.221 |
| 11 | 20.984 | 4822924 | 19.524 | 83477 | 7.134 |
| 12 | 27.209 | 11964 | 0.048 | 250 | 0.021 |
| 13 | 28.774 | 74012 | 0.300 | 2970 | 0.254 |
| 14 | 29.242 | 46761 | 0.189 | 2374 | 0.203 |
| 15 | 29.761 | 231481 | 0.937 | 16870 | 1.442 |
| 16 | 29.966 | 274784 | 1.112 | 19276 | 1.647 |
| 17 | 30.390 | 3954344 | 16.008 | 275885 | 23.576 |
| 18 | 30.610 | 3173114 | 12.846 | 220590 | 18.851 |
| 19 | 31.392 | 92590 | 0.375 | 5521 | 0.472 |
| 20 | 32.175 | 6302315 | 25.513 | 267413 | 22.852 |
| 21 | 33.338 | 2669010 | 10.805 | 165504 | 14.143 |
| 22 | 34.018 | 430510 | 1.743 | 16266 | 1.390 |
| 23 | 34.903 | 127702 | 0.517 | 6665 | 0.570 |
| 24 | 35.393 | 138908 | 0.562 | 8102 | 0.692 |
| 25 | 35.839 | 140870 | 0.570 | 8221 | 0.703 |
| 26 | 36.264 | 100619 | 0.407 | 5641 | 0.482 |
| 27 | 36.666 | 45202 | 0.183 | 2454 | 0.210 |
| 28 | 52.465 | 27440 | 0.111 | 301 | 0.026 |
| 合計 | | 24701940 | | 1170198 | |

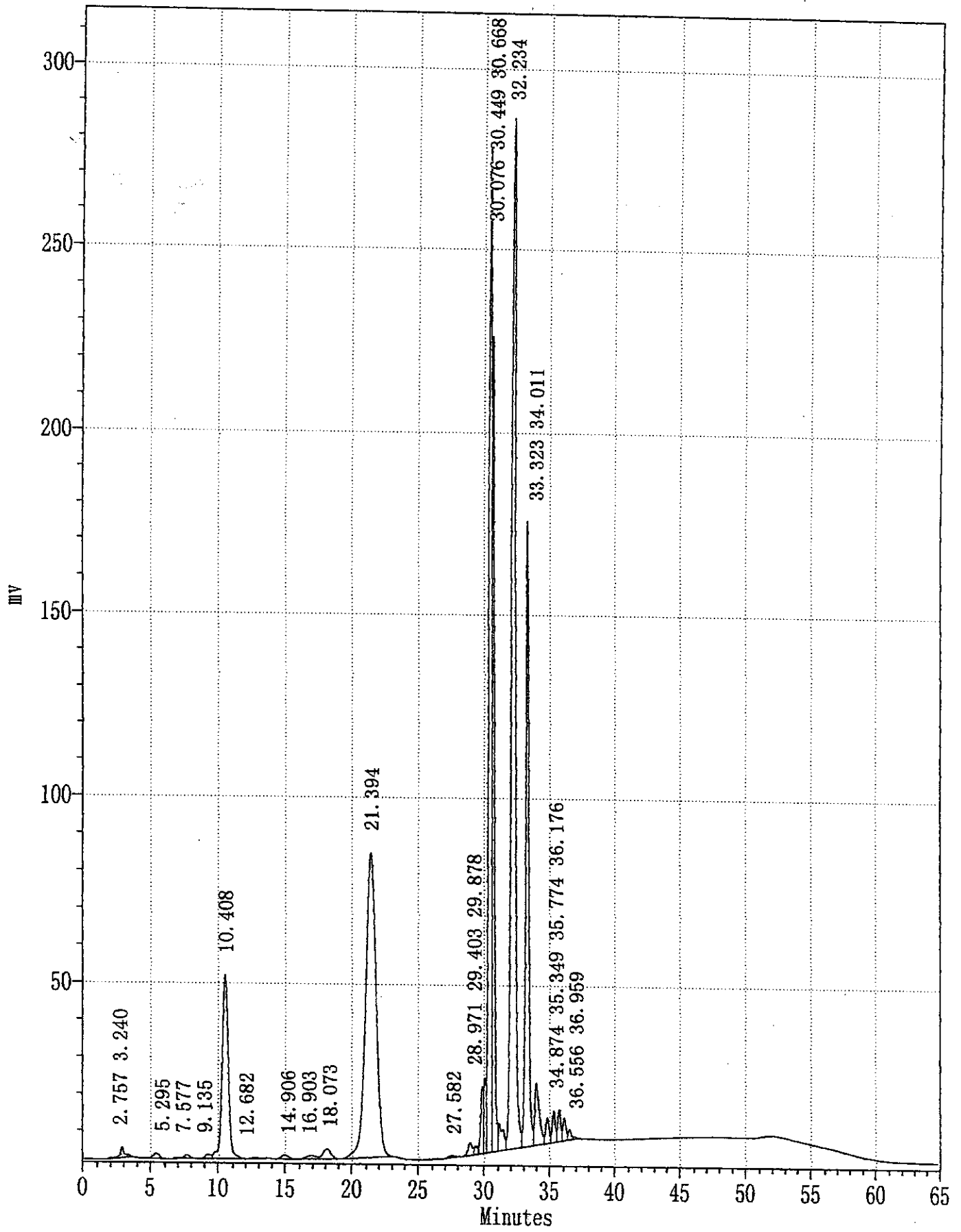


ファイル名:A9C02L23.CHR P x S O 1 8 1 0 4 0 0 - 6
 試料注入,日付:03-02-1999 時間:11:23:11
 印刷,日付:03-02-1999 時間:15:36:08

| No | R. T. (min) | 面積 (uv*sec) | 面積% | 高さ (uv) | 高さ% |
|----|----------------|----------------|--------|------------|--------|
| 1 | 2.757 | 55651 | 0.231 | 3009 | 0.253 |
| 2 | 3.240 | 10534 | 0.044 | 657 | 0.055 |
| 3 | 5.295 | 44527 | 0.185 | 1531 | 0.129 |
| 4 | 7.577 | 24890 | 0.103 | 1018 | 0.086 |
| 5 | 9.135 | 34170 | 0.142 | 1292 | 0.109 |
| 6 | 10.408 | 1607160 | 6.670 | 49692 | 4.181 |
| 7 | 12.682 | 10264 | 0.043 | 361 | 0.030 |
| 8 | 14.906 | 44920 | 0.186 | 1209 | 0.102 |
| 9 | 16.903 | 47116 | 0.196 | 1013 | 0.085 |
| 10 | 18.073 | 123248 | 0.512 | 2825 | 0.238 |
| 11 | 21.394 | 4687074 | 19.453 | 82149 | 6.912 |
| 12 | 27.582 | 19990 | 0.083 | 536 | 0.045 |
| 13 | 28.971 | 79132 | 0.328 | 3463 | 0.291 |
| 14 | 29.403 | 39258 | 0.163 | 2279 | 0.192 |
| 15 | 29.878 | 243308 | 1.010 | 18042 | 1.518 |
| 16 | 30.076 | 241520 | 1.002 | 20188 | 1.699 |
| 17 | 30.449 | 3988466 | 16.553 | 276048 | 23.227 |
| 18 | 30.668 | 3024886 | 12.554 | 222088 | 18.687 |
| 19 | 32.234 | 6121516 | 25.406 | 281337 | 23.672 |
| 20 | 33.323 | 2643628 | 10.972 | 169585 | 14.269 |
| 21 | 34.011 | 426166 | 1.769 | 16732 | 1.408 |
| 22 | 34.874 | 132162 | 0.549 | 6811 | 0.573 |
| 23 | 35.349 | 139041 | 0.577 | 8468 | 0.712 |
| 24 | 35.774 | 141872 | 0.589 | 8608 | 0.724 |
| 25 | 36.176 | 104756 | 0.435 | 6052 | 0.509 |
| 26 | 36.556 | 49126 | 0.204 | 2774 | 0.233 |
| 27 | 36.959 | 10484 | 0.044 | 701 | 0.059 |
| 合計 | | 24094862 | | 1188468 | |

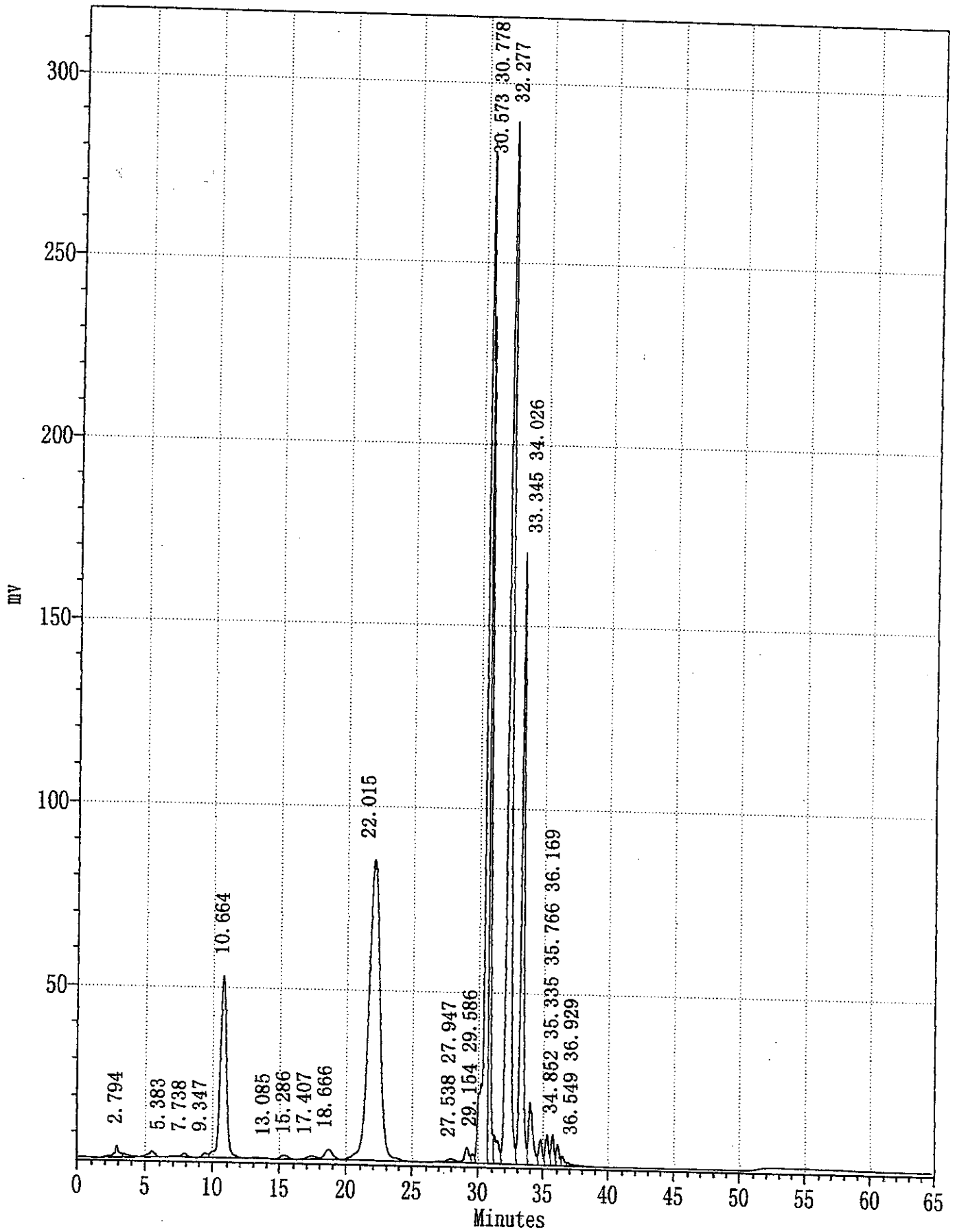

ファイル名:A9C01S24.CHR P x S O 1 9 1 0 4 0 0 - 1
 試料注入,日付:03-01-1999 時間:18:24:51
 印刷,日付:03-02-1999 時間:15:38:48

| No | R. T. (min) | 面積 (uv*sec) | 面積% | 高さ (uv) | 高さ% |
|----|----------------|----------------|--------|------------|--------|
| 1 | 2.794 | 73344 | 0.302 | 3331 | 0.284 |
| 2 | 5.383 | 91892 | 0.378 | 1665 | 0.142 |
| 3 | 7.738 | 27258 | 0.112 | 1104 | 0.094 |
| 4 | 9.347 | 35602 | 0.147 | 1354 | 0.115 |
| 5 | 10.664 | 1632038 | 6.716 | 49707 | 4.231 |
| 6 | 13.085 | 12153 | 0.050 | 357 | 0.030 |
| 7 | 15.286 | 44068 | 0.181 | 1167 | 0.099 |
| 8 | 17.407 | 45798 | 0.188 | 993 | 0.085 |
| 9 | 18.666 | 122886 | 0.506 | 2828 | 0.241 |
| 10 | 22.015 | 4811734 | 19.802 | 82223 | 6.999 |
| 11 | 27.538 | 11404 | 0.047 | 345 | 0.029 |
| 12 | 27.947 | 43774 | 0.180 | 1169 | 0.099 |
| 13 | 29.154 | 101246 | 0.417 | 4226 | 0.360 |
| 14 | 29.586 | 42304 | 0.174 | 2585 | 0.220 |
| 15 | 30.573 | 4506320 | 18.545 | 283631 | 24.145 |
| 16 | 30.778 | 2959102 | 12.178 | 232522 | 19.794 |
| 17 | 32.277 | 6070294 | 24.981 | 286698 | 24.406 |
| 18 | 33.345 | 2600356 | 10.701 | 167442 | 14.254 |
| 19 | 34.026 | 433706 | 1.785 | 17379 | 1.479 |
| 20 | 34.852 | 145774 | 0.600 | 7174 | 0.611 |
| 21 | 35.335 | 148366 | 0.611 | 8504 | 0.724 |
| 22 | 35.766 | 146122 | 0.601 | 8602 | 0.732 |
| 23 | 36.169 | 106222 | 0.437 | 5963 | 0.508 |
| 24 | 36.549 | 50356 | 0.207 | 2797 | 0.238 |
| 25 | 36.929 | 37280 | 0.153 | 955 | 0.081 |
| 合計 | | 24299400 | | 1174720 | |

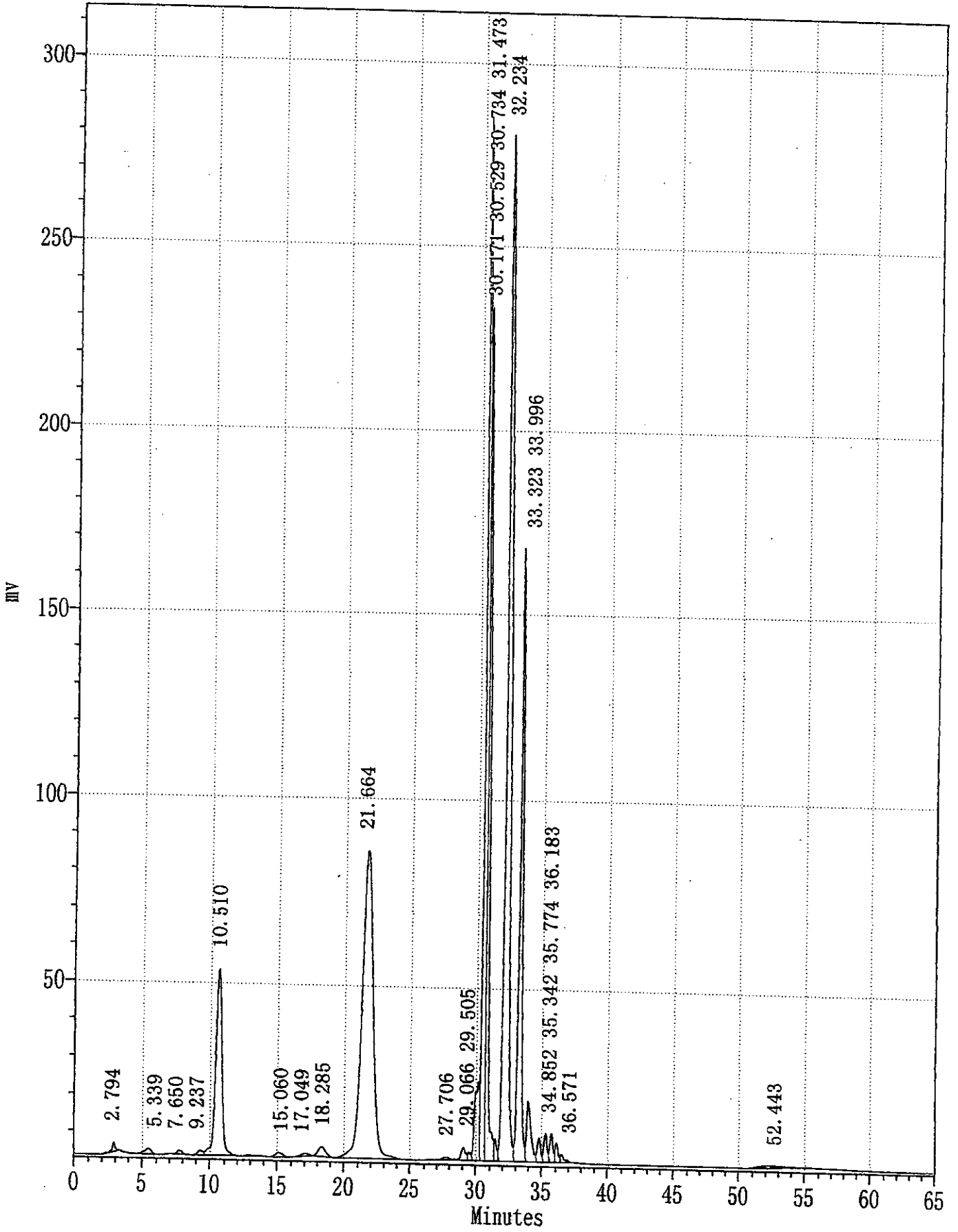

ステビア抽出物

Stevia extract

本品は、キク科ステビア(*Stevia rebaudiana* BERTONI)の葉から抽出して得られた、ステビオール配糖体を主成分とするものである。

含 量 本品を乾燥したものは、ステビオール配糖体として80.0%以上を含む。

性 状 本品は白～淡黄色の粉末、薄片または粒状で、においはないかわずかに特有のにおいがあり、清涼な甘味を有する。

確認試験(1)本品0.6gを量り、水100mlを加えて溶かし、これにn-ブタノール100mlを加え、よく振り混ぜてから静置して二層に分離させる。n-ブタノール層5mlをとり、必要があればろ過し、ろ液5mlをとり、これにアントロン試液5mlを管壁に沿って静かに加えて層積するとき、接界面は青～緑色を呈する。

(2)本品1.2gを量り、硫酸(1+4)40mlを加え、環流冷却器をつけて水浴中で2時間加熱する。冷却後、内容物を分液ロートに移し、ジエチルエーテル50mlずつで2回抽出する。エーテル層を合わせ、少量の水で2回洗い、無水硫酸ナトリウムで脱水した後、濃縮乾固する。残留物をメタノール10mlに溶かし、水10mlを加えて生じた沈殿をろ過する。ろ紙上の残留物は50%メタノールの少量で洗い、105℃で2時間乾燥した後、その融点を測定するとき、226～230℃である。(イソステビオール)

純度試験 (1)重金属 Pbとして $10\mu\text{g/g}$ 以下(1.0g、第2法、比較液 鉛標準液1.0ml)

(2)ヒ素 As_2O_3 として $2.0\mu\text{g/g}$ 以下(1.0g、第3法、装置B)

乾燥減量 6.0%以下(1g、105℃、2時間)

強熱残分 1.0%以下(1.0g)

定量法 本品60～120mgを精密に量り、アセトニトリル・水混液(80:20)に溶かして正確に100mlとし、検液とする。別にステビオサイド、レバウディオサイドAを105℃で2時間乾燥し、それぞれ約50mgを精密に量り、アセトニトリル・水混液(80:20)に溶かして正確に100mlとし、標準液とする。検液及び標準液につき、次の操作条件で液体クロマトグラフィーを行う。

操作条件

検 出 器：紫外吸光光度計(測定波長210nm)

カラム充てん剤：5 μm の NH_2 基結合シリカ、またはポリマー

カラム管：内径3.9～4.6mm、長さ150～300mmのステンレス管

カラム温度：40℃

移 動 相：アセトニトリル・水混液(80:20)

流 速：ステビオサイドの保持時間が約10分になるように調整する。

注 入 量：5～20 μ l

検液のステビオサイド、レバウディオサイド A、レバウディオサイド C、ズルコサイド A のピーク面積、及び標準液のステビオサイド、レバウディオサイド A のピーク面積を測定し、次の式により 4 成分の量を求め、その合計をもってステピオール配糖体含量とする。

$$\text{ステビオサイド (\%)} = \frac{\text{ステビオサイドの採取量 (mg)}}{\text{試料の採取量 (mg)}} \times \frac{\text{検液のステビオサイドのピーク面積}}{\text{標準液のステビオサイドのピーク面積}} \times 100$$

$$\text{ズルコサイド A (\%)} = \frac{\text{ステビオサイドの採取量 (mg)}}{\text{試料の採取量 (mg)}} \times \frac{\text{検液のズルコサイド A のピーク面積}}{\text{標準液のステビオサイドのピーク面積}} \times 100$$

$$\text{レバウディオサイド A (\%)} = \frac{\text{レバウディオサイド A の採取量 (mg)}}{\text{試料の採取量 (mg)}} \times \frac{\text{検液のレバウディオサイド A のピーク面積}}{\text{標準液のレバウディオサイド A のピーク面積}} \times 100$$

$$\text{レバウディオサイド C (\%)} = \frac{\text{レバウディオサイド A の採取量 (mg)}}{\text{試料の採取量 (mg)}} \times \frac{\text{検液のレバウディオサイド C のピーク面積}}{\text{標準液のレバウディオサイド A のピーク面積}} \times 100$$

(参考) この操作条件による時、各成分は付図のように流出する。

(注) アンダーライン部分が改正点

平成11年3月8日

試験結果報告書

日本製紙株式会社
小松島工場 技術環境室

技術環境室長
技術環境室試験担当者



(目的)

ステビア抽出物の自主規格変更案にそった試験の実施

(検体)

| | | | |
|---------|-------------|----|---|
| ステビア抽出物 | Lot. 900375 | -- | 1 |
| | 900377 | -- | 2 |
| | 900440 | -- | 3 |

尚、試験結果につきましては別紙参照願います。