


「JARO_CDMS」を起動する

ここでは、「専用 USB メモリ」から「JARO_CDMS」を起動するまでの手順を説明します。

1) 「専用 USB メモリ」を PC に挿入します。

2) 「専用 USB メモリ」の内容を表示します。

このマニュアルでは、D ドライブが「専用 USB メモリ」のドライブになっています。

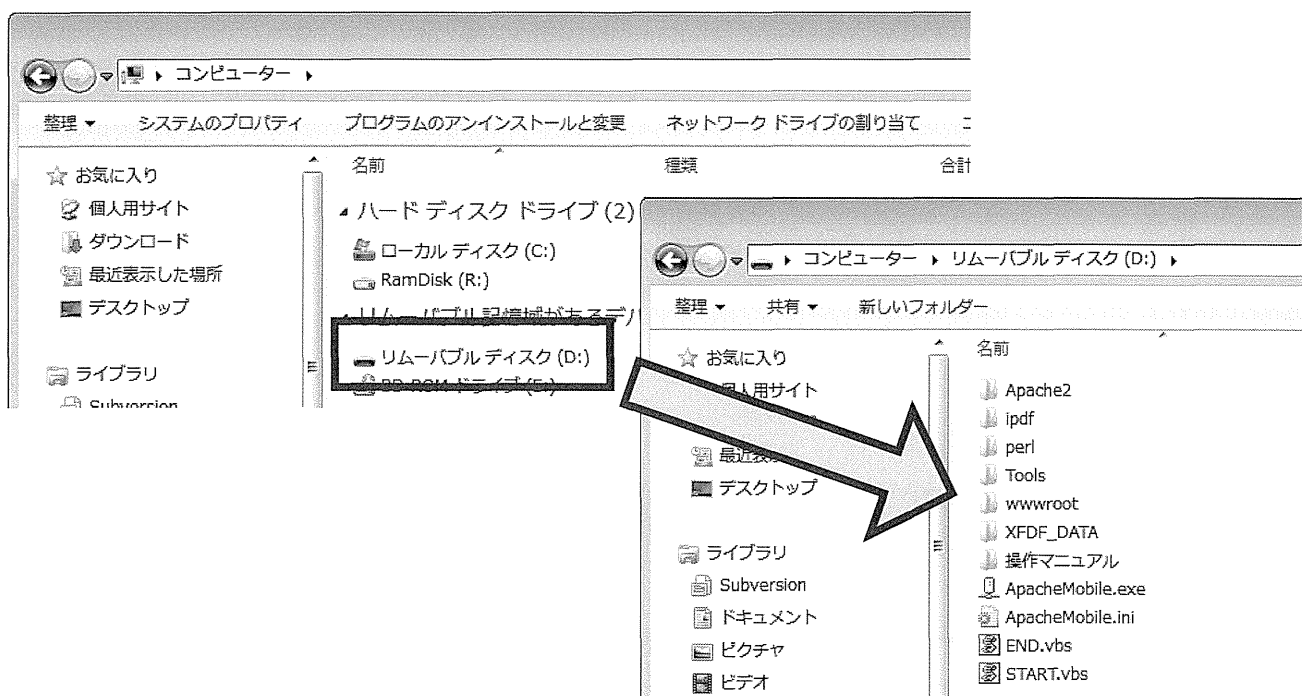


3) 「専用 USB メモリ」直下にある「START.vbs」をダブルクリックします。




ご利用の PC によっては、ファイル名が「START」と表示されている場合があります。

4) 「JARO_CDMS」が起動します。起動中のメッセージが表示されますので、しばらくお待ち下さい。

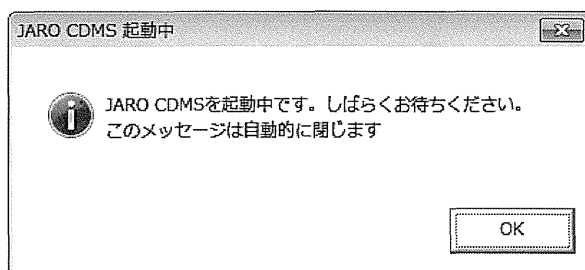

このメッセージは自動的に閉じます。

5) タイトル画面が表示されます。

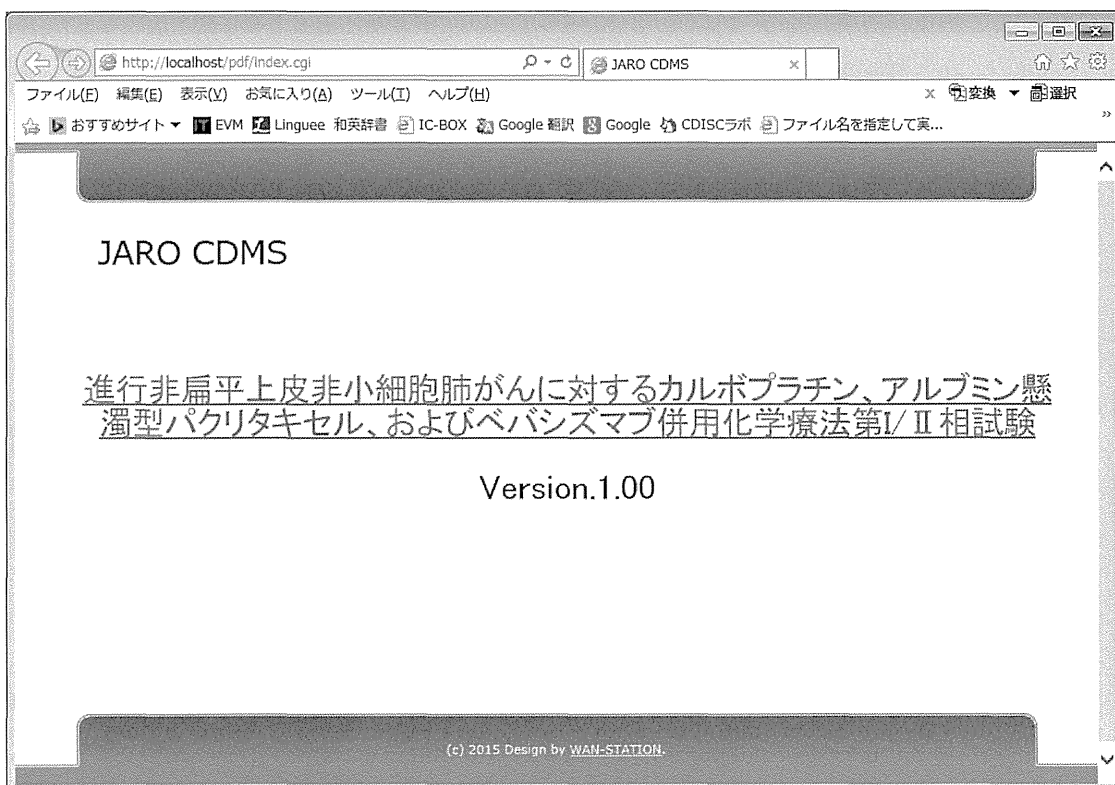

? 「JARO CDMS」起動時に「セキュリティの重要な警告」が表示された場合


「このプログラムについてはこのメッセージを表示しない」にチェックして、「OK」ボタンをクリックしてください

? 「JARO CDMS」起動時に、「セキュリティの警告」が表示された場合


「実行」ボタンをクリックしてください

- 6) タスクバーの設定を確認します。「スタート」ボタンをクリックし、「通知領域アイコン」と入力後、Enter キーを押します。


※以下6)～8)の操作は「JARO CDMS」初回起動時のみで結構です。

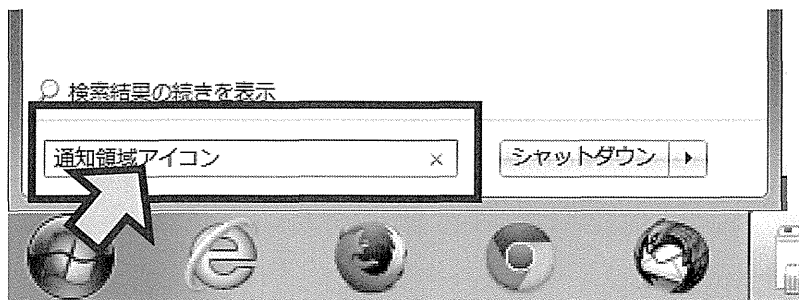

- 7) 「通知領域アイコン」の設定画面より、「ApacheMobile.exe」という名称のアイコンを探します。右側のプルダウンが「通知のみを表示」になっている場合は、「アイコンと通知を表示」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

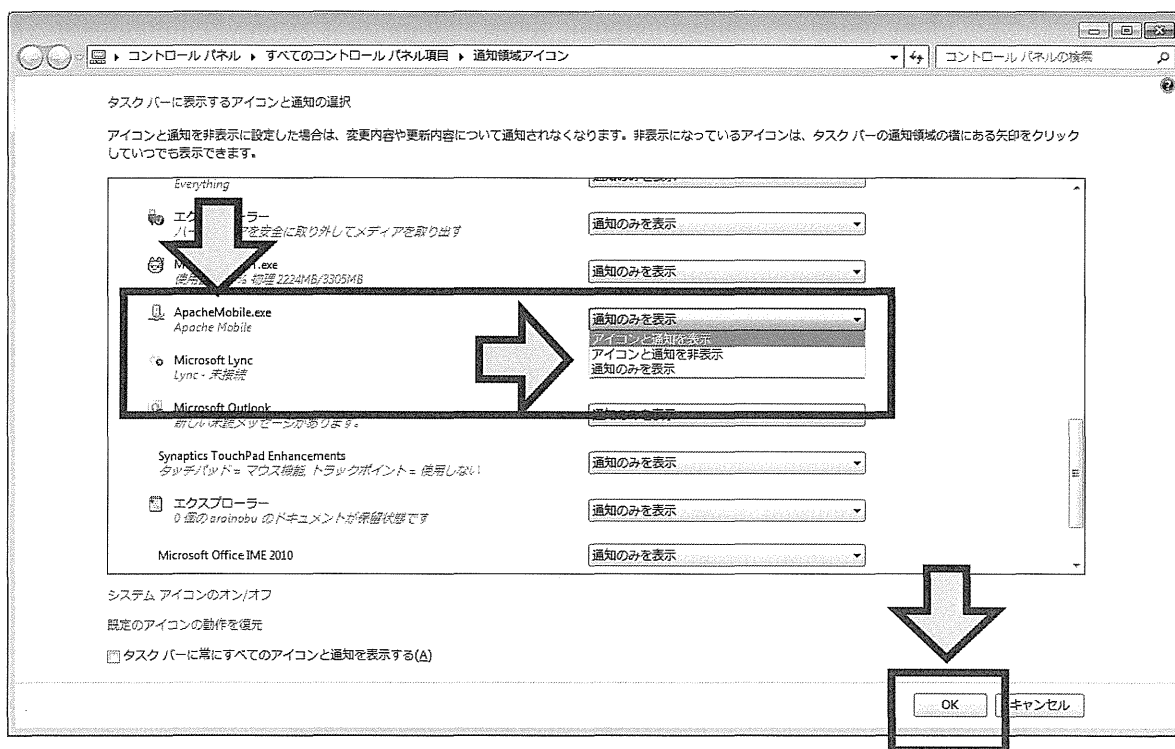


- 8) タスクバー（右下部分）に、「ApacheMobile」のアイコンが表示されていることを確認します。

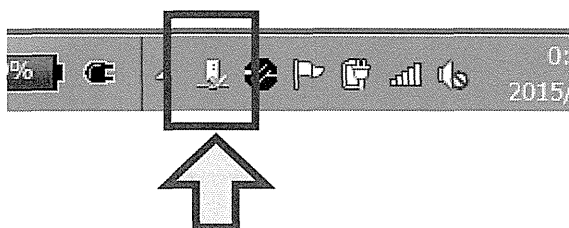


「JARO_CDMS」にログインする

ここでは、タイトル画面から「JARO_CDMS」にログインして、メニュー画面を表示するまでの手順を説明します。

- 1) タイトル画面中央にある「進行非扁平上皮～」をクリックします。

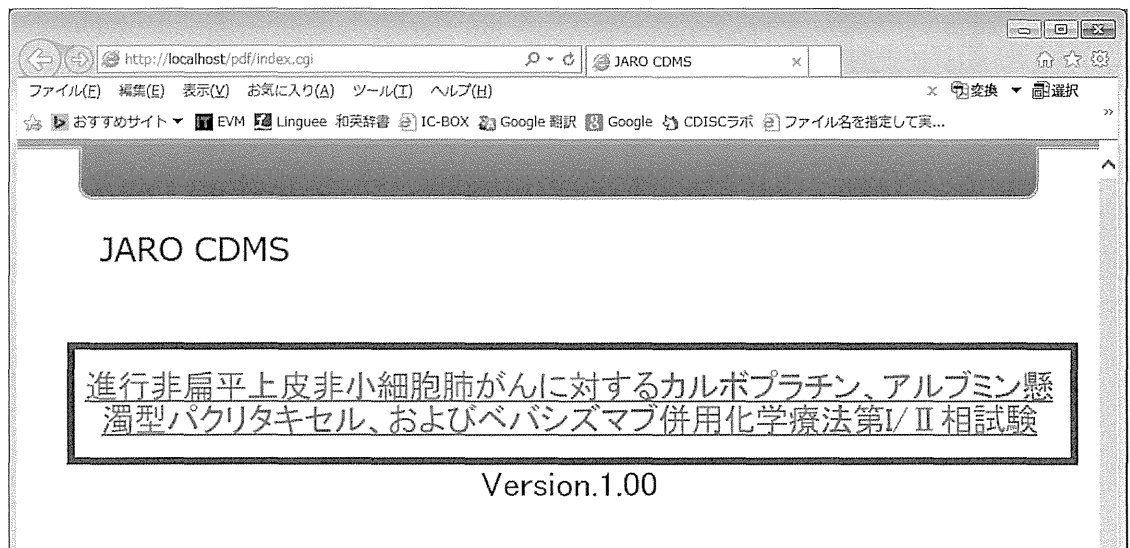

- 2) 別ウィンドウで、ログイン画面が表示されます。
「ユーザーID」「パスワード」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。

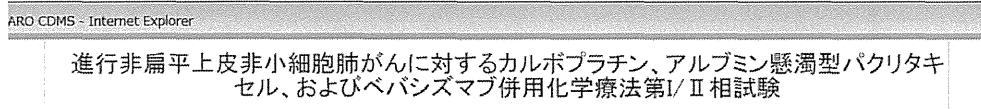


ユーザーID	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
<input type="button" value="ログイン"/>	
<input type="button" value="終了"/>	



ボタンの説明

- 「ログイン」ボタン
「JARO_CDMS」にログインします。
- 「終了」ボタン
この画面を閉じます。


3) ログインに成功すると、メニュー画面が表示されます。

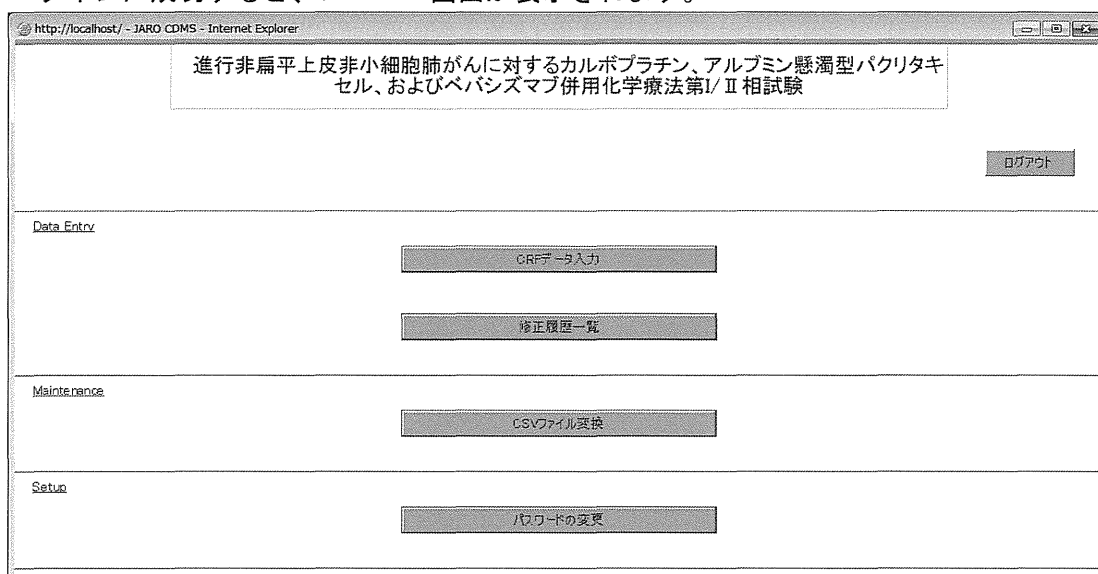

i ボタンの説明

「ログアウト」ボタン	ログアウトして、ログイン画面に戻ります。
「CRF データ入力」ボタン	CRF データの入力を行います。
「修正履歴一覧」ボタン	入力した CRF データの修正履歴を表示します。
「CSV ファイル変換」ボタン	入力した CRF データを CSV ファイルに変換します。
「パスワードの変更」ボタン	ログイン時のパスワードを変更します。


4) 「ユーザーID」または「パスワード」が間違っている場合は、エラーメッセージが表示されます。

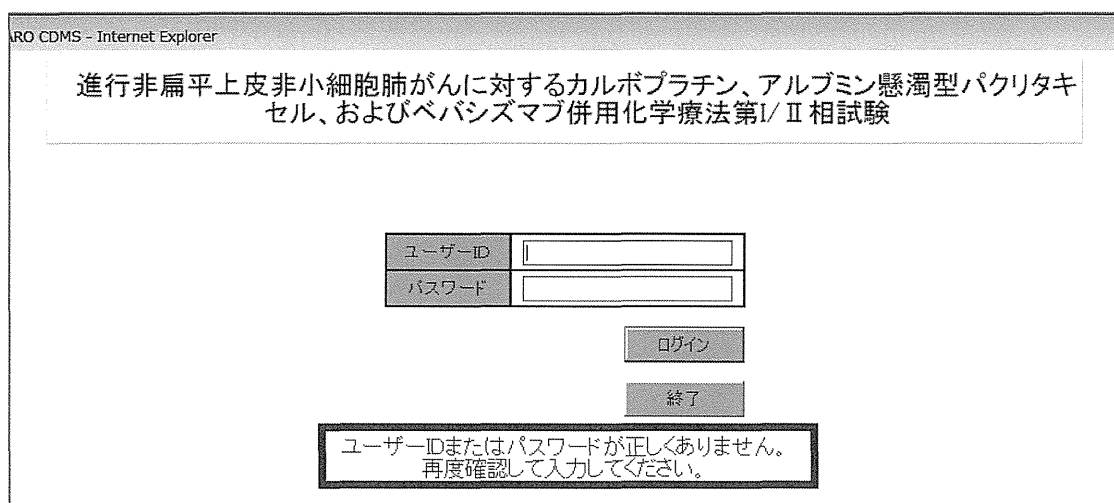


「JARO_CDMS」からログアウトする

ここでは、「JARO_CDMS」からログアウトする手順を説明します。


- 1) メニュー画面にある「ログアウト」ボタンをクリックします。

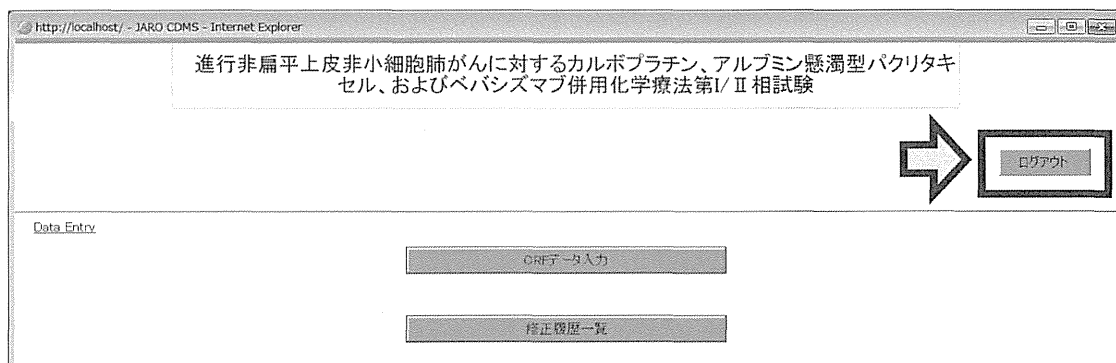

- 2) ログアウト中は、以下の画面が表示されます。しばらくお待ち下さい。

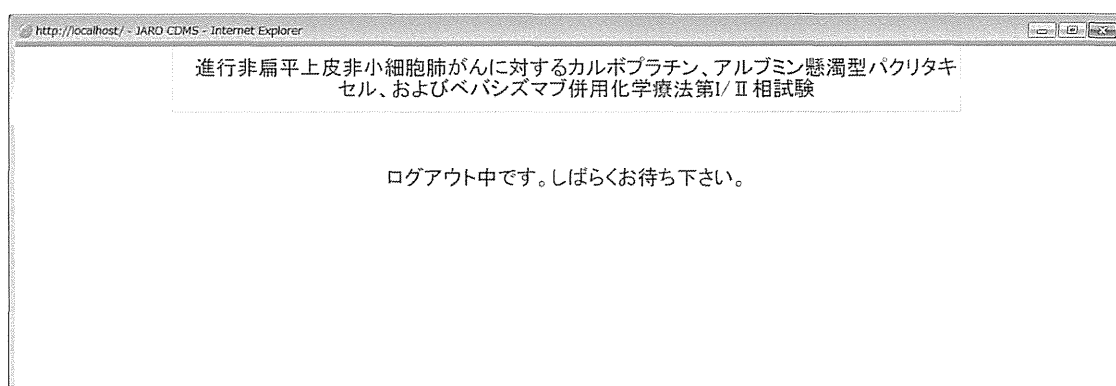

- 3) ログアウト完了後、ログイン画面が表示されます。

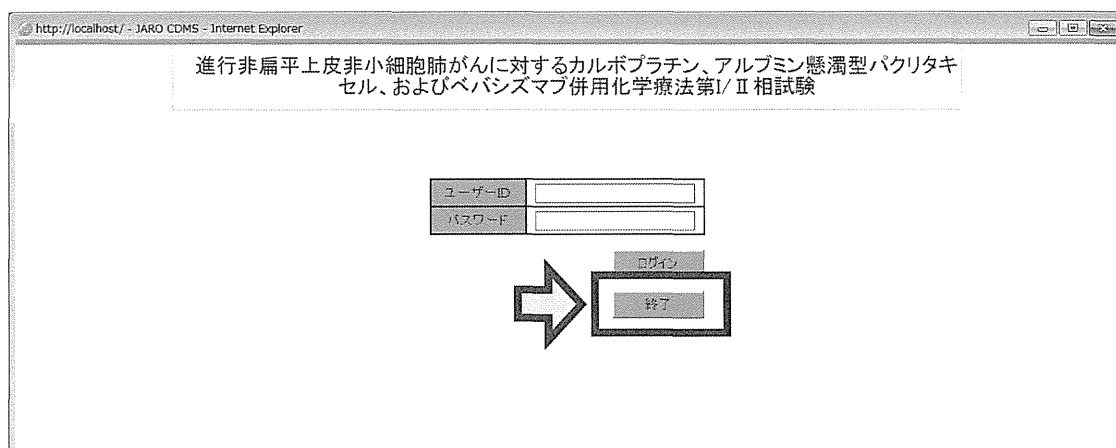

「JARO_CDMS」を終了する場合は、「終了」ボタンをクリックして、この画面を閉じてください。

「JARO_CDMS」を終了する

ここでは、「JARO_CDMS」を終了する手順を説明します。



「JARO_CDMS」を終了するときは、必ずこの手順通りに行ってください。

「JARO_CDMS」を終了せずに「専用 USB メモリ」を取り外してしまうと、「専用 USB メモリ」内のデータが破損してしまう恐れがあります。


1) 「JARO_CDMS」からログアウトします。




ログアウトするには? → 「「JARO_CDMS」からログアウトする」をご覧ください

2) ログイン画面の「終了」ボタンをクリックします。

3) タイトル画面を閉じます。

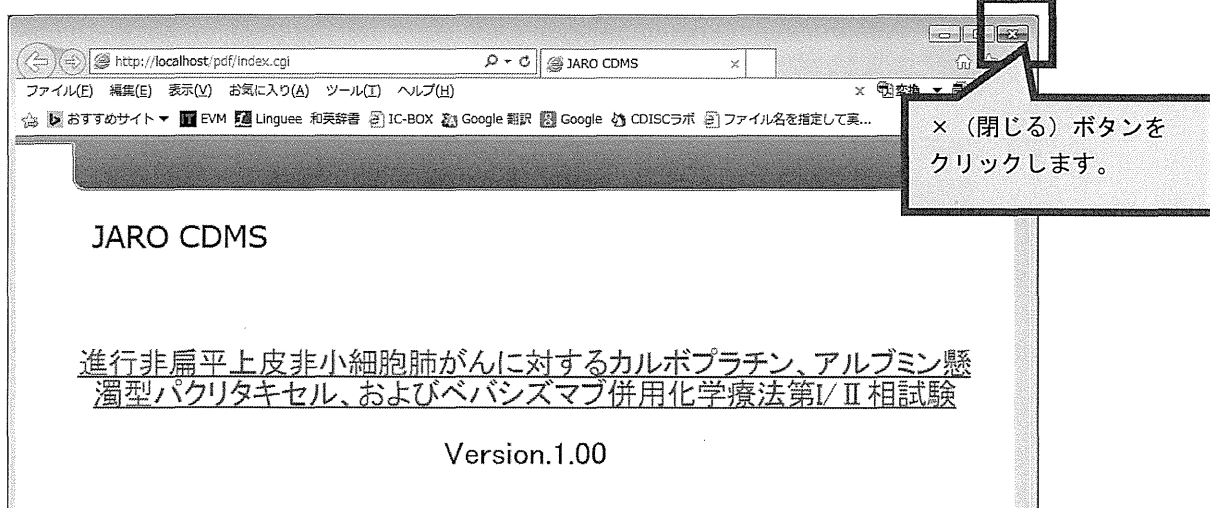


4) 専用 USB メモリ直下にある「END.vbs」をダブルクリックします。

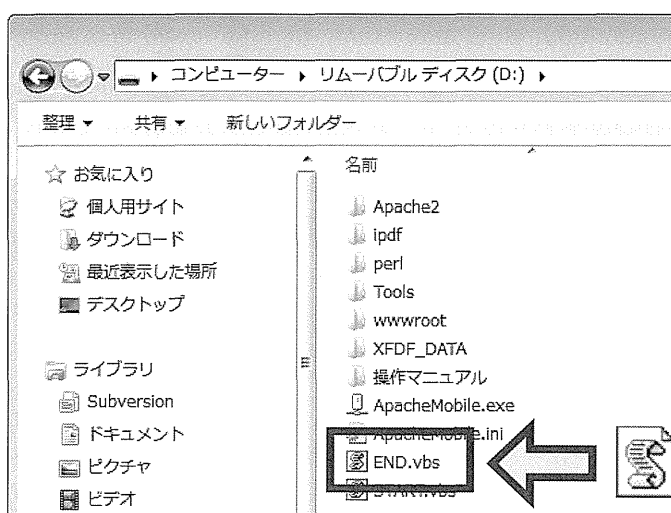


ご利用の PC によっては、ファイル名が「END」と表示されている場合があります。


- 5) 以下の画面 (ApacheMobile 設定画面) が表示されます。「Apache 終了確認」メッセージの「OK」ボタンをクリックします。画面右下にある「Stop」ボタンをクリックします。

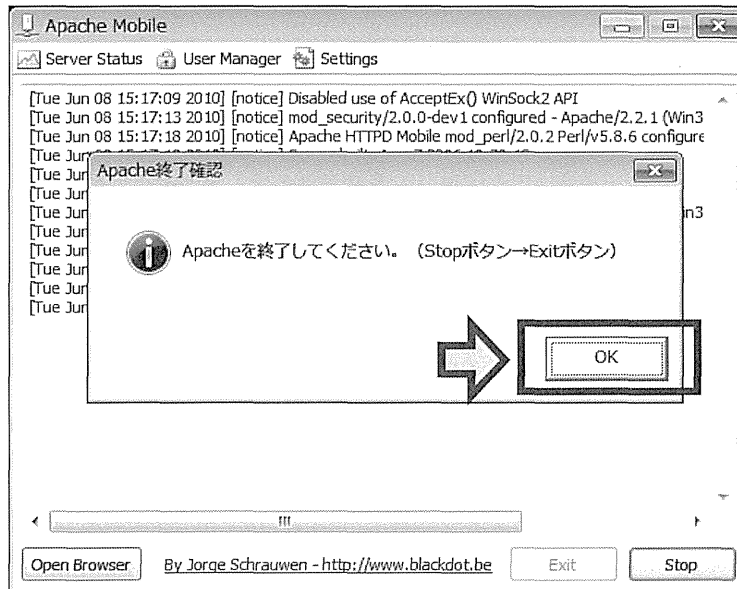

- 6) 画面右下にある「Stop」ボタンをクリックします。

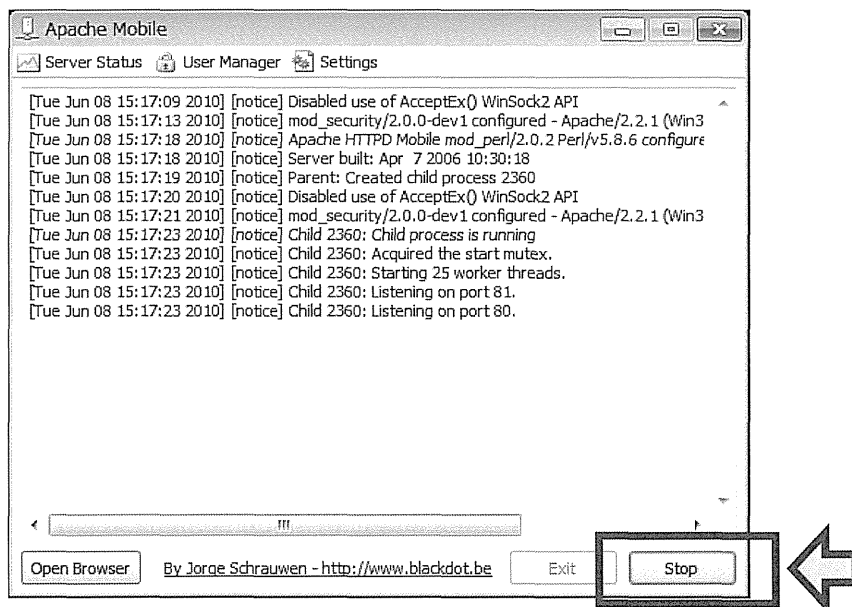

- 7) 「Exit」ボタンがクリック可能になりますので、「Exit」ボタンをクリックします。

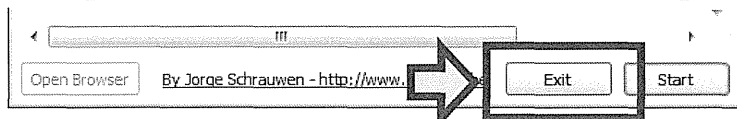


- 8) 最後に、「専用 USB メモリ」を取り外します。


CRF データを入力する

ここでは、メニュー画面から、各 CRF データを入力するまでの手順を説明します。


- 1) メニュー画面にある「CRF データ入力」ボタンをクリックします。

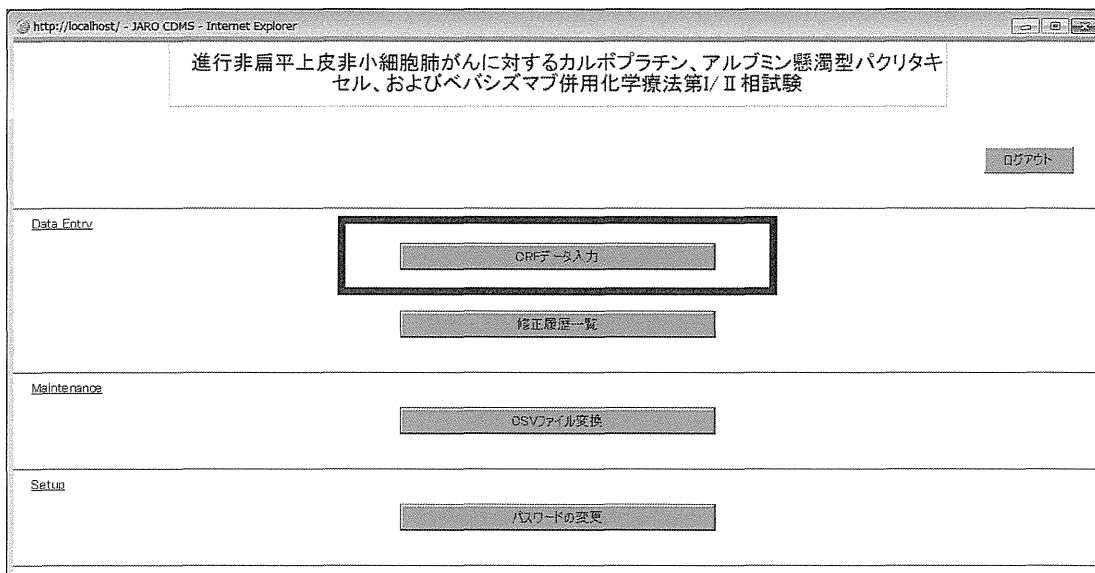

- 2) 症例選択画面に遷移します。初回起動時は入力データが存在しないため、以下の画面となります。

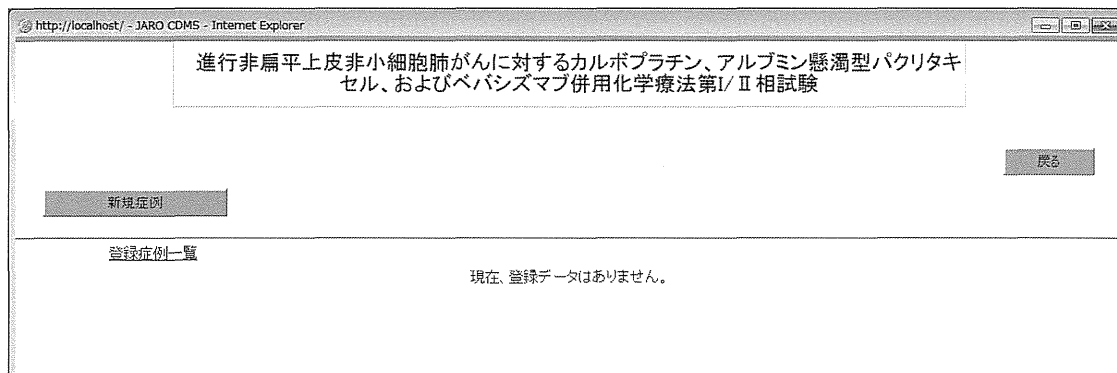

- 3) 新規入力を行います。画面左上にある「新規症例」ボタンをクリックします。

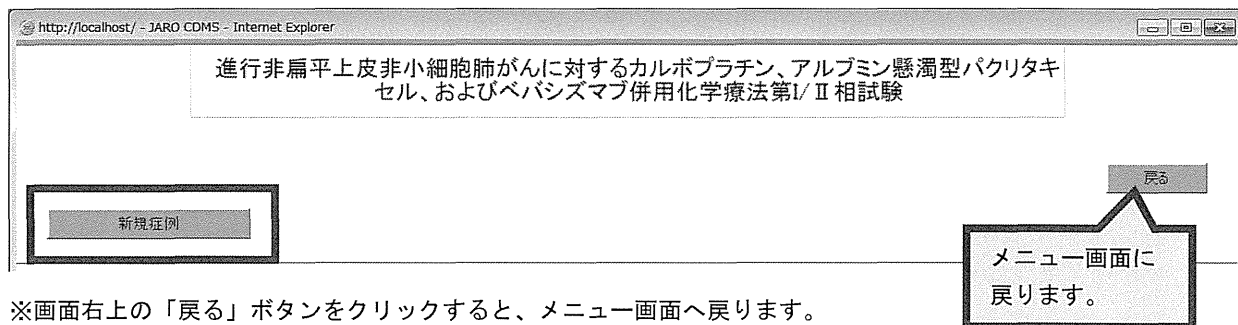

※画面右上の「戻る」ボタンをクリックすると、メニュー画面へ戻ります。

- 4) 新規症例登録画面に遷移します。以下の情報を入力後、「OK」ボタンをクリックします。

入力項目名	必須/任意	入力規則	備考
被験者識別番号	必須	数値 2 桁 + ハイフン + 数値 2 桁 で入力 既に使用した「被験者識別番号」は 利用できない	JARO_CDMS 内で症例 を特定するための識別 番号
医療機関名	必須		
診療科名	必須		
同意取得日	必須	yyyy 年 mm 月 dd 日形式で入力	
生年月日	必須	yyyy 年 mm 月 dd 日形式で入力	
性別	必須	「男性」「女性」どちらかを選択	

進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル、およびペバシズマブ併用化学療法第I/II相試験

戻る

新規症例登録

共通項目	被験者識別番号	<input type="text"/>
	医療機関名	<input type="text"/>
	診療科名	<input type="text"/>
同意取得日	同意取得日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
被験者荷票	生年月日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
	性別	<input type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性

OK

- 5) 必須項目に入力が無い、または入力規則に合致しない場合、エラーメッセージ画面に遷移します。「戻る」ボタンをクリックして、新規症例登録画面に戻ります。

進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル、およびペバシズマブ併用化学療法第I/II相試験

戻る

医療機関名は入力必須項目です。

新規症例登録画面に戻ります。

- 6) 新規症例登録が完了すると、CRF 選択画面へ遷移します。こちらの画面についてはのちほど説明します。ここで「戻る」ボタンをクリックします。

進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル、およびペバシズマブ併用化学療法第I/II相試験

戻る

被験者識別番号	01-01
医療機関名	テスト病院
診療科名	テスト科

CRF List

CRF名	ステータス	ハッシュ値	最終更新日	印刷
登録票	SAVE	-	2015/03/17 00:57	
経過記録	SAVE	-	2015/03/17 00:57	

- 7) 症例選択画面に遷移します。新規症例登録を実施した後は、以下の画面のように「登録症例一覧」情報が表示されます。「CRF データ」を入力する症例の「Select」リンクをクリックします。

医療機関名、診療科名、仮登録番号を確認して、「Select」をクリックします。

進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル、およびペバシズマブ併用化学療法第I/II相試験

新規症例

登録症例一覧

Select	医療機関名	診療科名	被験者識別番号	最終更新日
Select	テスト病院	テスト科	01-01	2015/03/17 00:57

メニュー画面に戻ります。

i 登録症例一覧情報の説明

Select	CRF 選択画面に移動するリンクです。
医療機関名	医療機関名を表示します。
診療科名	診療科名を表示します。
被験者識別番号	被験者識別番号を表示します。
最終更新日	CRF データの最終更新日時を表示します。

8) CRF 一覧画面に遷移します。

http://localhost/7P1-01-01&P2-0&PD-1 - JARO CDMS - Internet Explorer

進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル、およびベバシズマブ併用化学療法第I/II相試験

被験者識別番号	01-01
医療機関名	テスト病院
診療科目名	テスト科

症例選択画面の内容が表示されます。

戻る

症例選択画面に戻ります。

CRF List

CRF名	ステータス	ハッシュ値	最終更新日	印刷
登録票	SAVE	-	2015/03/17 00:57	
経過記録	SAVE	-	2015/03/17 00:57	

i CRF List の説明

① CRF 名 分冊名を表示します。
【症例報告書(術前～術後 30 日)～症例報告書(術後 3 年/中止時)】
 分冊名をクリックすると入力用 PDF 画面に移動します。
 (データ固定状態のときはクリックできなくなります)
【症例報告書(TLR/TVR)】
 分冊名をクリックすると CRF 選択画面 2 に移動します。

② ステータス 現在のステータスを表示します。
 「SAVE」 データ入力可能な状態
 「LOCK」 データ固定の状態 (入力不可)

③ ハッシュ値 ステータスが「LOCK」のとき、固定されたデータのハッシュ値を表示します。

④ 最終更新日 該当する分冊データの最終更新日時を表示します。


⑤ 印刷 プリンターのマークをクリックすると印刷用 PDF 画面に移動します。

次頁以下、CRF データの入力手順を説明します。

※「登録票」を例に説明していきます。

「登録票」の入力

9) CRF 名の「登録票」リンクをクリックします。

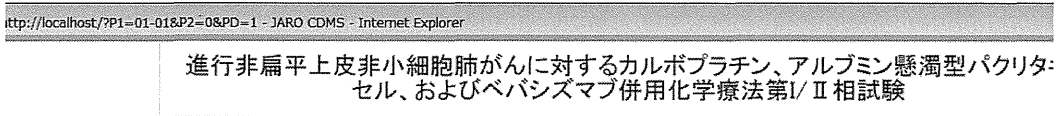

被験者識別番号	01-01
医療機関名	テスト病院
診療科名	テスト科

CRF List

CRF名	ステータス	ハッシュ値	最終更新日時
登録票	SAVE	-	2015/06/00:57
	SAVE	-	2015/06/00:57

10) 「登録票」のデータ入力画面が表示されます。

登録適格性確認票
一 進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタセル、およびベバシズマブ併用療法第I/II相試験

症例登録センター FAX: 03-3570-0343 / TEL: 03-3520-0111 (代表)
受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～17:00 (休館)、祝祭日および休館日を除く
【症例選択基準に関する問合せ先】がん研究会有明病院 TEL: 03-3520-0111 (代表)

下記太枠内にご記入の上、萩原さんへ送して下さい

医療機関名-科名	テスト病院テスト科
試験担当医師	カルテ番号
患者イニシャル	姓 [] 名 [] 性別 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
生年月日	年 [] 月 [] 日 [] 身長 [] cm
文書取得日	年 [] 月 [] 日 体重 [] kg

選択基準 (口欄のどちらかをチェックおよび必要事項を記載して下さい)

	YES	NO
[1] 以前発症した癌病歴で、本試験対象 (肺癌、非小細胞肺癌) 以外の癌病歴がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[2] 以前発症した癌病歴で、本試験対象 (肺癌、非小細胞肺癌) 以外の癌病歴があるが、進行非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌) の診断 (病理・腫瘍学検査) により、本試験対象 (肺癌、非小細胞肺癌) であることが確認されている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[3] 20歳以上 75歳未満	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[4] Performance Status (ECOG) が 0-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[5] 脳転移病変から 12 週以上の生存が期待できる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[6] RECIST ver1.1 で測定可能な病変を有する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[7] EGFR-TKI 療法は ALK inhibitor の既往投与日から 6 週間以上経過している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[8] 病期が所定の病期 (病期別) であり、かつ、予後が良好であると判断される	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[9] 主要観測指標が下記の基準を満たしている (登録日より 7 日以内)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

メモ: このフォームの入力済みコピーを、ご使用のコンピュータに保存することはできません。記録を残したい場合は、入力済みのフォームを印刷してください

次回から表示しない

閉じる(C)



お使いの PC によっては、データ入力時に以下のメッセージが表示されます。

この様なメッセージが表示された場合は、「次回から表示しない」にチェックを入れて、「閉じる」ボタンをクリックしてください。

フォーム情報は保存できません

フォーム情報は保存できません

メモ: このフォームの入力済みコピーを、ご使用のコンピュータに保存することはできません。記録を残したい場合は、入力済みのフォームを印刷してください

次回から表示しない

閉じる(C)


1 1) データ入力を行います。

しおりの説明(入力画面の左側部分)

SAVE FILE 入力データを保存します。

LOCK FILE 入力データを固定します。1回保存を実行すると選択可能になります。
※一度データ固定してしまうと、入力データは編集不可となります。

CANCEL 入力データの保存・固定をキャンセルして、CRF 選択画面に戻ります。

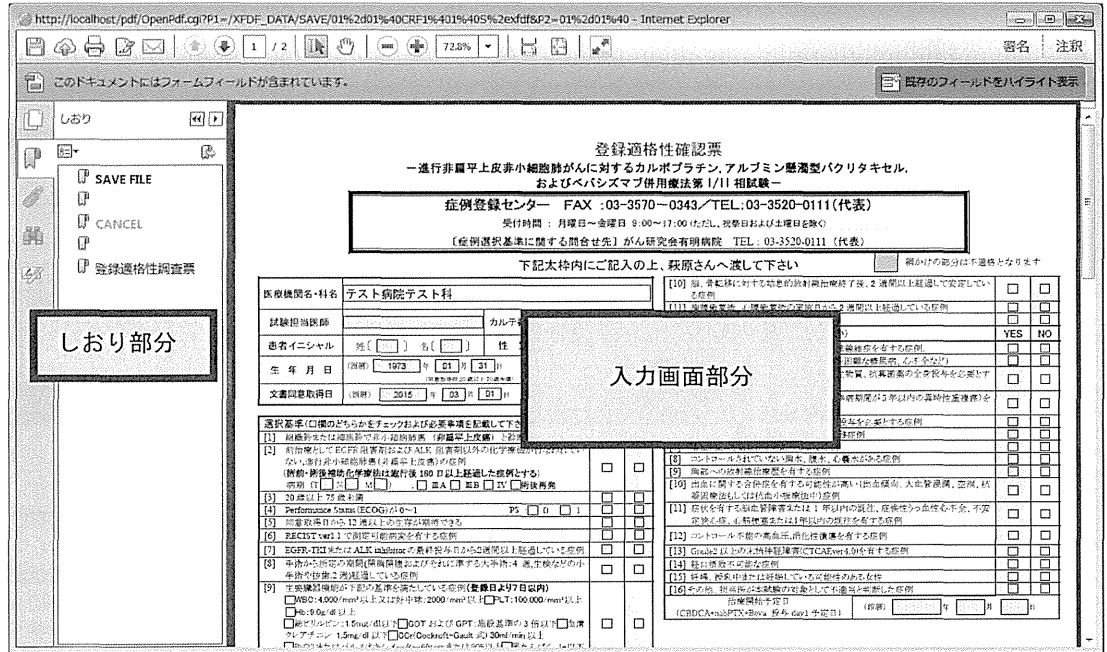

入力項目について

- ① 青い枠線で囲まれた部分が入力できる項目欄になります。
- ② 各入力項目へは、マウスをクリックするか、Tab キーで移動することで入力状態になります。
- ③ 年月日や時刻等の数値のみ入力可能な項目では、自動的に半角入力状態になります。
- ④ 上記以外の項目では、自動的に全角入力状態になります。(半角への切替も可能です)
- ⑤ 日付(一部曖昧入力可能な日付は除く)の項目では、存在しない値(例: 月に13と入力)を入力すると、以下の様なエラーメッセージが表示されます。

Adobe Acrobat

01から12の範囲で入力してください。

OK

CRF データを保存する（初回保存時）

ここでは、入力した CRF データを保存する手順について説明します。

初回保存時は、入力データの内容をそのまま保存します。※2 回目以降は修正履歴の入力が必要ですが本マニュアルでは「登録票」を例にして、説明していきます。

- 1) データ入力画面の左上にある「SAVE FILE」をクリックします。

登録適格性確認票
一進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル、およびベバシズマブ併用療法第 I/II 相試験

症例登録センター FAX : 03-3570-0343 / TEL : 03-3520-0111 (代表)
受付時間 : 月曜日～金曜日 9:00～17:00 (ただし、夜間および土曜日 8 時)
【症例選択基準に関する問合せ先】がん研究会有明病院 TEL : 03-3520-0111 (代表)


下記太枠内にご記入の上、取原さんへ渡して下さい

医療機関名・科名	テスト病院テスト科				
試験担当医師	カルテ番号				
患者イニシャル	姓 [] 名 []	性別	男 <input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/>		
生年月日	西暦 [1979] 年 [01] 月 [31] 日	身長	[] cm		
文書取得日	西暦 [2015] 年 [03] 月 [01] 日	体重	[] kg		

選択基準 (口裏のどちらかをチェックおよび必要事項を記載して下さい) YES NO

[1] 病歴または細胞診で非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌) と診断された症例	<input type="checkbox"/>	[5] 男性の全身体格検査 (20 歳以上の成人) の検査を必要とする症例	<input type="checkbox"/>
[2] 新治療として EGFR 阻害剤および ALK 阻害剤以外の化学療法が行われていない症例	<input type="checkbox"/>	[6] 病歴を有しない (または検査を有する) 脳転移症例	<input type="checkbox"/>
[3] 脳転移を有する症例 (脳転移を有する症例は除外)	<input type="checkbox"/>	[7] 癌性、感染症、およびその他の原因による発熱	<input type="checkbox"/>
[4] 病歴の追跡 (即時監査実施および参加期間が 5 年以上の即時監査実施) を必要とする症例	<input type="checkbox"/>		

- 2) 確認ウィンドウが表示されます。保存する場合は「OK」ボタン、保存をキャンセルする場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

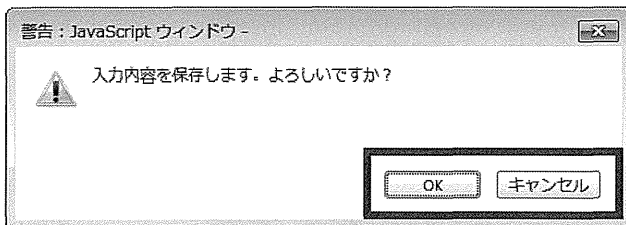

i 左図のように、メッセージのタイトルに「警告:」と表示される場合がありますが、そのまま続行して問題ありません。

- 3) データ保存中メッセージが表示されます。しばらく待ちください。

- 4) 自動的にデータ保存中画面が表示されます。そのままお待ちください。

5) データ保存が完了すると、CRF 選択画面に遷移します。

進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル、およびペバシズマブ併用化学療法第I/II相試験

被験者識別番号	01-01
医療機関名	テスト病院
診療科名	テスト科

保存した CRF データの最終更新日が変更されます。

CRF List

CRF名	ステータス	ハッシュ値	最終更新日	印刷
登録票	SAVE	-	2015/03/17 01:50	
経過記録	SAVE	-	2015/03/17 01:52	

i データ保存時のエラーについて

データ保存時にエラーが発生した場合は、データ復旧が自動実行されます。
 (エラー発生時は、以下のエラーメッセージが表示されます。)
 復旧したデータは、最後にデータ保存が完了した状態と同じ内容になります。

データ保存時にエラーが発生しました。
直前の状態まで復旧します…

CRF データを保存する (2 回目以降保存時)

ここでは、入力した CRF データを保存する手順について説明します。

2 回目以降の保存時では、前回からの変更がある場合に修正履歴の入力が必要になります。

本マニュアルでは「登録票」を例にして、説明していきます。

- 1) データ入力画面の左上にある「SAVE FILE」をクリックします。

登録適格性確認票
一進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルプミン懸濁型パクリタキセル、およびペバシズマブ併用療法第 I/II 相試験

症例登録センター FAX : 03-3570-0343 / TEL: 03-3520-0111 (代表)

受付時間 : 月曜日～金曜日 9:00～17:00 (休日、祝日および土曜日を除く)
【症例選択基準に関する問合せ先】がん研究センター病院 TEL : 03-3530-0111 (代表)

下記太枠内にご記入の上、萩原さんへ送して下さい

医療機関名・科名	テスト病院テスト科	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
試験担当医師	担当医師あいうえお カルチ番号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
患者イニシャル	姓()名()性別	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
生年月日	西暦 [1975] 年 [01] 月 [31] 日 身長	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
文書閲覧履歴日	(初回) [2015] 年 [02] 月 [01] 日 体重	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

選択基準(白欄のどちらかをチェックおよび必要項目を記載して下さい) YES NO

(1) 前症例が本試験で前小細胞肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 前症例が本試験で前大細胞肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) 前症例が本試験で前非小細胞肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(8) システムエラーにより発生したエラー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(9) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(10) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2) 確認ウィンドウが表示されます。保存する場合は「OK」ボタン、保存をキャンセルする場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

警告: JavaScript ウィンドウ

入力内容を保存します。よろしいですか?

OK キャンセル

左図のように、メッセージのタイトルに「警告:」と表示される場合がありますが、そのまま続行して問題ありません。

- 3) データ保存中メッセージが表示されます。しばらく待ちください。

登録適格性確認票
一進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルプミン懸濁型パクリタキセル、およびペバシズマブ併用療法第 I/II 相試験

データ保存中です...

症例登録センター FAX : 03-3570-0343 / TEL: 03-3520-0111 (代表)

【症例選択基準に関する問合せ先】がん研究センター病院 TEL : 03-3530-0111 (代表)

下記太枠内にご記入の上、萩原さんへ送して下さい

医療機関名・科名	テスト病院テスト科	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
試験担当医師	担当医師あいうえお カルチ番号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
患者イニシャル	姓()名()性別	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
生年月日	西暦 [1975] 年 [01] 月 [31] 日 身長	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
文書閲覧履歴日	(初回) [2015] 年 [02] 月 [01] 日 体重	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

選択基準(白欄のどちらかをチェックおよび必要項目を記載して下さい) YES NO

(1) 前症例が本試験で前小細胞肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 前症例が本試験で前大細胞肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) 前症例が本試験で前非小細胞肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(8) システムエラーにより発生したエラー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(9) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(10) 前症例が本試験で前肺癌(登録学上変更)と判断された症例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 4) 自動的にデータ保存中画面が表示されます。そのままお待ちください。

進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルプミン懸濁型パクリタキセル、およびペバシズマブ併用療法第 I/II 相試験

データ保存中です...

しばらくお待ち下さい。

- 5) 前回保存時の内容から変更がある場合は、修正理由入力画面に遷移します。「修正理由」を入力後、「更新」ボタンをクリックします。

http://localhost/ - JARO CDMS - Internet Explorer

進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル、およびペバシズマブ併用化学療法第I/II相試験

戻る

修正理由入力

修正項目詳細

項目名	修正前入力内容	修正後入力内容	修正理由
登録票 試験担当医師 試験担当医師	担当医師あいうえお	担当医師あいうえおかきく	入力ミス

更新 取消

選択した修正理由をリセットします。

「入力ミス」「指示あり」「その他」から選択します。
「その他」選択時は、右側のテキストボックスに詳細を入力します。

- 6) データ保存および修正理由入力が完了すると、CRF 選択画面に遷移します。

http://localhost/ - JARO CDMS - Internet Explorer

進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル、およびペバシズマブ併用化学療法第I/II相試験

戻る

被験者識別番号	01-01
医療機関名	テスト病院
診療科名	テスト科

保存した CRF データの最終更新日が変更されます。

CRF List

CRF名	ステータス	ハッシュ値	最終更新日	印刷
登録票	SAVE	-	2015/03/17 01:50	🖨️
経過記録	SAVE	-	2015/03/17 01:52	🖨️



データ保存時のエラーについて

データ保存時にエラーが発生した場合は、データ復旧が自動実行されます。
(エラー発生時は、以下のエラーメッセージが表示されます。)
復旧したデータは、最後にデータ保存が完了した状態と同じ内容になります。

http://localhost/#PDF - JARO CDMS - Internet Explorer

進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル、およびペバシズマブ併用化学療法第I/II相試験

データ保存時にエラーが発生しました。
直前の状態まで復旧します…

CRF データを固定する（ロックする）


ここでは、入力または保存した CRF データを固定する手順について説明します。

本マニュアルでは「登録票」を例にして、説明していきます。


- 1) データ入力画面のしおりにある「LOCK FILE」をクリックします。

The screenshot shows a web browser window displaying a registration form titled "登録適格性確認票" (Registration Eligibility Confirmation Form). The form includes fields for patient information, study details, and consent. A sidebar on the left contains navigation buttons: "SAVE FILE", "CANCEL", "登録適格性調査票", and "LOCK FILE". The "LOCK FILE" button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it.

- 2) 確認ウィンドウが表示されます。続行する場合は「OK」ボタン、キャンセルする場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

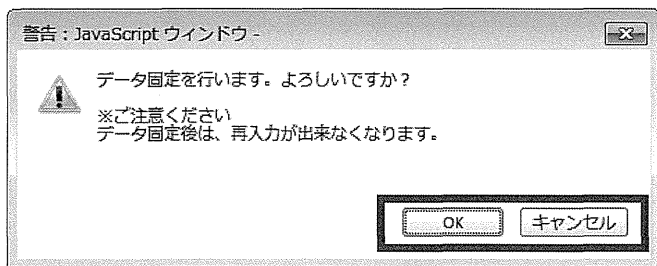


- 3) 次に、固定キーワード入力ウィンドウが表示されます。データ固定を行う場合は、キーワードに「LOCK」（半角英大文字）と入力し、「OK」ボタンをクリックします。「キャンセル」ボタンをクリックすると、データ固定をキャンセルします。

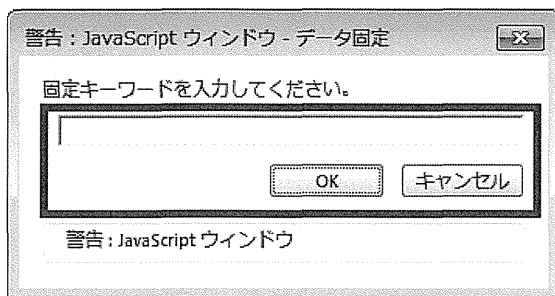


ご注意下さい

データ固定を行うと、それ以降の入力は出来なくなります。

- 4) データ保存中メッセージが表示されます。しばらく待ちください。

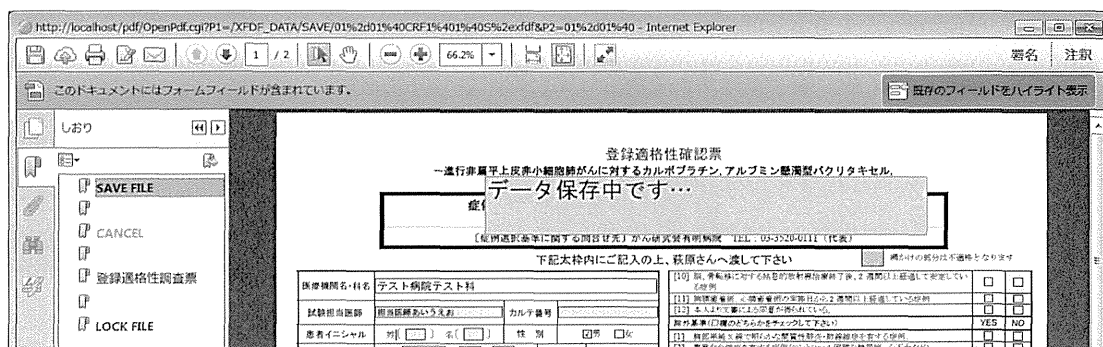

- 5) 自動的に、データ保存中画面が表示されます。そのままお待ちください。

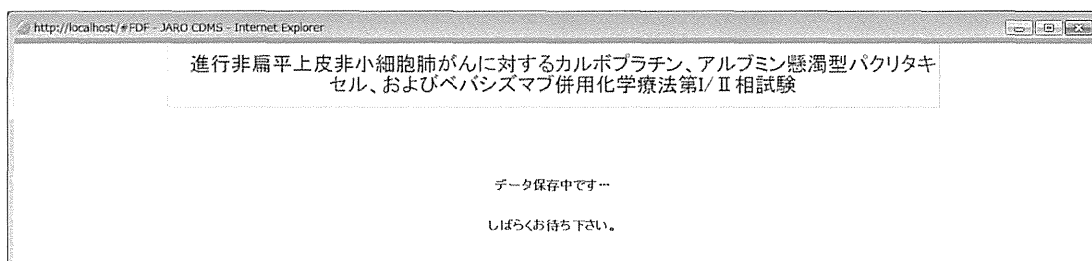

- 6) データ固定が完了すると、CRF 選択画面に遷移します。

