

検体内訳

	施設A	施設B	施設C	施設D	施設E
性別 (M/F)	2 / 2	14 / 11	10 / 13	15 / 7	19 / 9
年齢 中央値 (範囲)	47 (40-58)	56 (3-78)	50 (20-64)	59 (17-70)	41 (17-65)
疾患等					
ドナー	2	4	23	3	11
多発性骨髄腫*		11		13	4
悪性リンパ腫	2	7		6	13
その他患者		3			
検体種別					
末梢血幹細胞採取物	7	53	46	108	77
末梢血	7	35	46	52	39


*類縁疾患を含む

各施設と国際標準的な測定法

	施設A	施設B	施設C	施設D	施設E	国際ガイドライン
Platform	Dual	Dual	Dual	Dual	Dual & Single	Single
ゲート法	ISHAGE	Milan変法	Bender	ISHAGE変法	ISHAGE	ISHAGE
溶血法	固定あり	固定なし	固定あり	固定なし	固定なし	固定なし
洗浄	あり	なし	あり	あり	なし	なし
死細胞試薬	なし	なし	なし	なし	なし	(BM・CBは必要)
機器精度管理	Flow-check Pro	なし	Calibrite beads	定期メンテ	定期メンテ	
CD34+の精度管理	なし	なし	なし	なし	なし	
SRLデータとの回帰直線の傾き	0.78	0.87	0.53	1.04	0.68	
SRLデータとの有意差の有無	なし	あり	あり	なし	あり	

SRL測定値に対して最もデータの低い 施設と高い施設

施設C

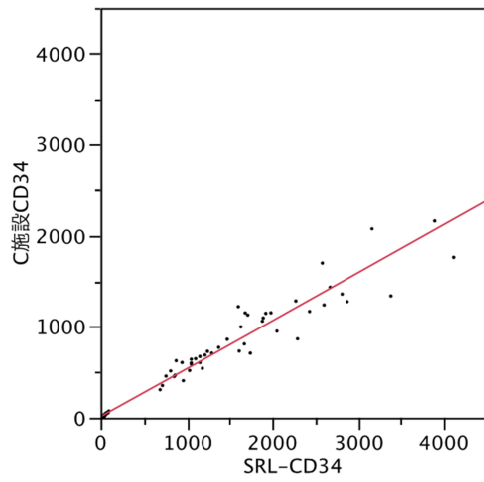

施設D

